

■ ■ wissner-  
■ ■ bosserhoff


L'élégance fonctionnelle au service des soins



hospitel

Lits de soins



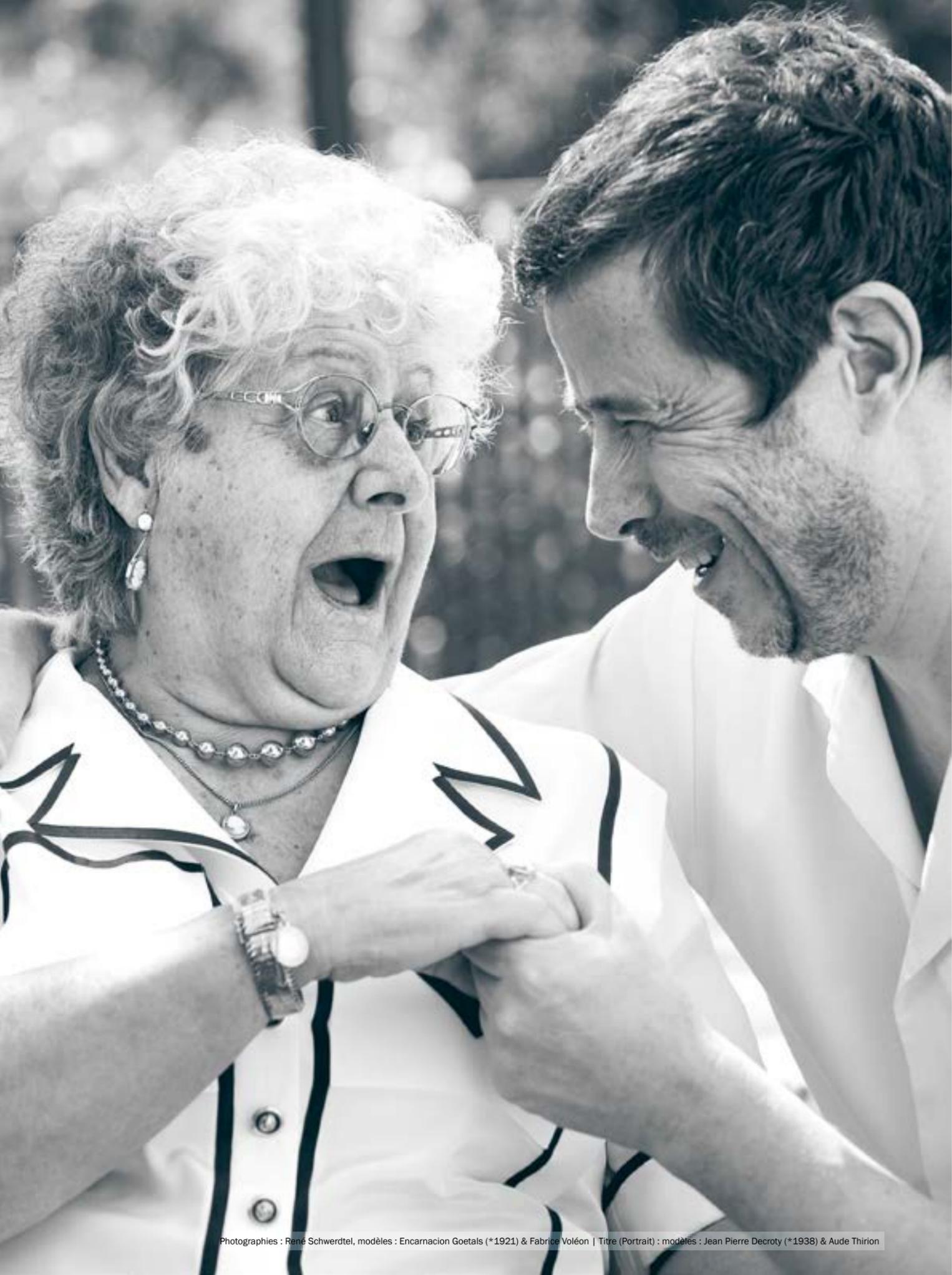

# Le concept hospitel

Plus qu'un lit de soin ou d'hôpital : hospitalier + hôtel = hospitel

Le concept hospitel associe convivialité, confort et multifonctionnalité. Il n'est pas tant élaboré pour les soins aigus, mais plutôt pour les soins de suite de patients et résidents dans les unités suivantes :

- Soins de longue durée
- Gériatrie
- Orthopédie
- Rééducation, réadaptation fonctionnelle
- Chirurgie esthétique

Le concept hospitel procure au patient un environnement propice à une guérison rapide.



## Aperçu des points forts

- Design chaleureux pour un environnement « bien-être » propice à une guérison rapide
- Barrières latérales favorisant la mobilité : sans espaces entre les demi-barrières, sans rails dans les dossier tête et pied
- Nettoyage facilité grâce aux surfaces en matière composite
- Réduction des risques d'infection nosocomiale grâce à la tête de lit rabattable et aux barrières de sécurité, exemptes de protecteur
- Fonctions pré-programmées sur la télécommande : chaise cardiaque (position fauteuil) et position jambes surélevées (Fowler)
- Mise en place de la rallonge de lit d'une seule main (en option)
- Sommier BiNetic pour la prévention des escarres et une position assise de confort ergonomique

# Le concept hospitel



Nous avons fait le choix de matières et de coloris qui reprennent les tendances naturelles actuelles. L'atmosphère qui s'en dégage est conviviale et chaleureuse et permet au résident de se sentir à son aise et en sécurité.



Lits de soins bas sentida 6, modèle A10



Table de chevet vivo E2T



Décor merisier

# hospitel | Fonctionnalité et convivialité

01

## Concept breveté de demi-barrières de sécurité SafeFree®

Souvent imitée, mais jamais égalee, notre contribution à la réduction des mesures de contention vont dans le sens de l'initiative « Werdenfelser Weg »\*\* et du projet Redufix\*\*\*

- 4 barrières latérales de sécurité, dotées d'un réglage de la hauteur sur 4 niveaux
- Pas d'espace entre les demi-barrières, pas d'accessoires obligatoires encombrants.

02

## Hauteur variable intelligente\*\*\*

- Prévention des chutes pendant la phase de sommeil avec une position basse à 27 cm
- Mobilisation du résident en toute sécurité à hauteur d'assise, avec une position intermédiaire à 41 cm
- Position haute à 80 cm, optimale pour les soins

03

## Sommier BiNetic

à double translation :

Une vraie prévention des escarres qui va bien au-delà des sommiers standards, équipés de la translation du relève-buste uniquement.

- Translation du relève-buste de 11 cm mais également translation du relève-jambes de 6 cm
- Réduction des compressions dans la région du sacrum ainsi que des frottements et des cisaillements

04

## Télécommande design

- 3 niveaux de verrouillages : mode soins, mode résident et mode sécurité (toutes les fonctions sont verrouillées)
- 2 positions automatiques : la position fauteuil et la position Fowler
- Réglage de la hauteur du plan de couchage
- Commande de la veilleuse de nuit
- Réglage indépendant du relève-jambes
- Protection contre les utilisations involontaires



## NOUVEAUTÉ !

Revêtement antimicrobien désormais disponible.



05

## Veilleuse de nuit

Une veilleuse de nuit, intégrée sous le plan de couchage, est disponible en option

- Meilleure orientation pendant la nuit
- Plus de sécurité pour le résident
- Peut être allumée ou éteinte avec la télécommande

06

## Manoeuvrabilité sentida 6 (Fig.)

- Choix du diamètre des roues : 100, 125 ou 150 mm
- Mobilité totale, même en dehors de la chambre du patient
- Frein centralisé en pied de lit et roue directionnelle

## Données techniques\*\*\*

- Amplitude de la hauteur variable : 27 - 80 cm
- Charge de fonctionnement en toute sécurité : 225 kg

Hospitel peut être adapté sur tous les lits de la gamme wissner-bosserhoff :



movita

movita casa

carisma


sentida 1, 3, 4

sentida 5

# 3 longueurs de lit | Hauteur variable intelligente

## 200 cm

Longueur du lit 200 cm : les demi-barrières latérales offrent une protection sans espace supérieur à 318 mm\* et sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une protection

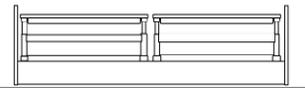

## 220 cm

Rallonge de lit avec poignée sur 220 cm : réglage temporaire en fonction des besoins ; protection intégrale garantie au moyen d'une poignée de mobilisation côté pied (accessoire).



## 210 cm

Longueur du lit 210 cm : protection avec des barrières latérales prolongées vers le pied du lit sans accessoire et sans espace supérieur à 318 mm\*\*.



### 3 longueurs de lit sans espace supérieur à 318 mm

Tous les lits de soins wissner-bosserhoff disposent en série d'une rallonge de sommier intégrée. Grâce à la rallonge de sommier Express, le sentida doté de demi-barrières latérales de sécurité s'adapte très facilement aux différentes longueurs de lit. Les prescriptions de la nouvelle norme CEI 60601-2-52 sont ainsi respectées quelle que soit la configuration.

### hauteur variable avec 3 positions automatiques : position de nuit, de sortie de lit et de soins

La hauteur variable du sentida 6 dispose, en plus d'une grande amplitude de la hauteur du plan de couchage de 27 à 80 cm, d'un système intelligent qui permet d'actionner la position fauteuil ou Fowler de n'importe quelle hauteur du sommier, sans que les dossierers ne touchent le sol. Ceci constitue un avantage indispensable, notamment lors de l'utilisation de la position fauteuil quand le sommier est rallongé à 220 cm.

#### Le système intelligent de réglage de la hauteur variable :

- Amplitude de 27 - 80 cm
- Position de jour à 41 cm pour sortir du lit à une hauteur de siège, respectueuse des principes de l'ergonomie.
- Prévention du risque de collision avec le sol lors du réglage de la position fauteuil à partir de la position basse, même lors de l'utilisation de la rallonge de sommier

## 27 cm

Pour la prévention des chutes et un couchage en toute sécurité la nuit



## 41 cm

Pour sortir du lit à une hauteur de siège respectueuse des principes de l'ergonomie



## 80 cm

Pour le confort des soins sans exercer de pression sur le dos



# SafeFree®

Le système conçu à la fois pour la sécurité, la liberté et la mobilisation

### 4 barrières latérales

#### 1

Réglées en position basse, les demi-barrières offrent un aspect visuel chaleureux et très esthétique. Elles permettent d'accéder sans obstacle au patient pour effectuer ses soins quotidiens, changer ses pansements ou faire le lit. La sortie du lit est aisée pour le patient car dans cette position la demi-barrière ne produit pas de compression au niveau des cuisses.

### 4 niveaux

#### Aucune protection requise



### 4 avantages

Liberté grâce aux barrières escamotées sans montant pour entraîner l'accès au patient



#### 2

Pour assurer une sécurité satisfaisante pendant la nuit, il suffit souvent de combiner le couchage en position basse avec l'utilisation de la barrière latérale de sécurité côté tête, relevée au niveau du matelas. Cette protection évite l'usage de barrières superflues, réduit le risque de chute et offre une aide à l'orientation pour le patient alité, sans contention.

#### Protection légère sans contention



#### L'orientation sans la contention




#### 3

La protection ¾ est indiquée pour laisser un espace au pied du lit, permettant à l'occupant d'en sortir, et pour réduire la contention en satisfaisant aux exigences de sécurité élevées. Associée à un ajustement de la hauteur du plan de couchage, cette configuration est une aide à la mobilisation du résident, quelle que soit sa taille.

#### Protection ¾ sans contention



#### Mobilisation avec adaptation à la taille du patient

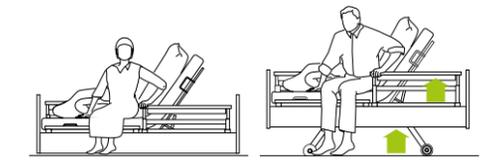


#### 4

La position la plus haute des barrières protège intégralement le patient sur toute la longueur du lit. Les 4 demi-barrières offrent alors le même niveau de sécurité que des barrières pleine longueur et ne nécessitent aucun accessoire de rehausse supplémentaire.

#### Protection intégrale pour les matelas de 12 - 18 cm



#### Sécurité au-delà des exigences de la nouvelle norme CEI 60601-2-52

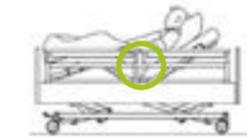

# SafeSense\*

Sécurité + liberté, de jour comme de nuit, grâce au capteur indicateur de sortie de lit

wissner-bosserhoff recherche toujours les solutions les plus sécuritaires pour vos résidents, tout en essayant de réduire au maximum les mesures de contention, de jour comme de nuit. Le SafeSense est le dispositif innovant, équipé d'une veilleuse de nuit qui s'allume automatiquement lors de la sortie du lit et s'éteint au retour du patient. Il est compatible avec tous les systèmes d'appel malade disponibles sur le marché, et s'adapte sur tous les lits de soins wissner-bosserhoff, livrés et installés à partir de 2002.



↓

**Plus de sécurité,  
moins de contention**

- Réaction du personnel soignant plus rapide en cas de chute
- Plus de sécurité, même la nuit et le week-end, quand il y a moins de personnel
- Idéal en complément des performances des lits de soins sentida et des demi-barrières SafeFree®

## Veilleuse de nuit automatique Alarme personnalisable

- La veilleuse de nuit s'allume automatiquement lorsque le résident sort du lit
- La veilleuse de nuit s'éteint dès que le résident a regagné son lit
- L'alarme de sortie de lit peut se régler de 0 à 30 minutes
- Elle s'adapte aux patients et à leur autonomie



## Adaptable sur tous nos lits

- Disponible en accessoire pour les lits de soins WIBO, disponibles actuellement
- Kit d'adaptation pour tous les lits de soins WIBO livrés et installés depuis 2002
- Fonctionne avec un câble ou en WiFi



# Options

De nombreuses options permettent d'adapter le lit aux besoins des différents services



## Plug & Play

Le plug & play peut être installé sur le côté droit ou le côté gauche du lit, sous le plan de couchage, et permet de débrancher facilement la télécommande quand cela s'avère nécessaire.



## Support pour sangle de fixation

Les supports pour sangles de fixation, disponibles en option, peuvent être installés au niveau du relève-cuisse, du relève-buste ou de l'assise.



## Gaine thermo-rétractable

Une gaine thermo-rétractable peut être ajoutée sur le câble d'alimentation du lit afin d'en empêcher la torsion et de prévenir les risques de strangulation pour les patients très agités ou dans les services psychiatriques. (en option)



## Protections 3D

Les protections 3D protègent efficacement les murs en cas de contact, dans le sens horizontal lors du déplacement du lit, et dans le sens vertical lors du réglage de la hauteur.




## CPR

La remise à plat d'urgence du relève-buste est positionnée sur le haut du relève-buste et est accessible des deux côtés du lit. Elle permet au relève-buste de revenir rapidement en position horizontale en cas d'urgence ou de panne électrique.

## Freins verrouillés (sans ill.)

Dans certains services psychiatriques, le lit ne doit être bougé ni par le personnel, ni par les patients. Un dispositif permet de verrouiller complètement les freins quand cela est nécessaire. (en option - uniquement pour lit de soins sentida 5/6 et carisma)

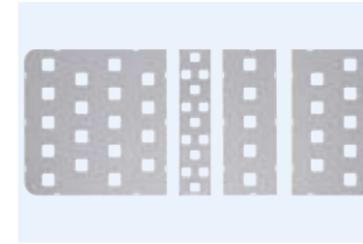

## Plan de couchage non amovible

Quand les patients sont particulièrement agités, il est possible de fixer les éléments du plan de couchage sur le cadre du lit. Cette option est disponible avec tous les modèles de plan de couchage de la gamme wissner-bosserhoff.



## Panneaux de tête et de pied rabattables

Les panneaux de tête et de pied rabattables offrent au personnel soignant un accès optimal au patient en cas d'urgence. Ils permettent également de procurer des soins de meilleure qualité, limitant ainsi les risques d'infections nosocomiales.



## Protection antichocs

Des protections antichocs protègent le lit sur toute la longueur du long pan des détériorations qui peuvent être occasionnées par l'utilisation d'un fauteuil roulant ou lors de la sortie du lit de la chambre.



## Rallonge de sommier Express

La rallonge de lit Express permet d'adapter la longueur du lit de 10 ou 20 cm facilement et sans outils (disponible uniquement avec les demi-barrières 10).



## Housse de barrières

Les housses de barrières sont conçues pour protéger les patients agités et permettent de répondre à des besoins ponctuels selon son état général et les objectifs cliniques.

## Batterie (sans ill.)

Une batterie, située sur le moteur permet l'utilisation des fonctions électriques du lit en cas de coupure de courant ou pendant le transport.

# Le concept hospitel


Les parties bois des panneaux tête et pied, ainsi que les mains courantes des barrières ont une forme arrondie pour limiter les risques de blessure des patients les plus agités. La construction des panneaux, avec les montants en bois massif qui les encadrent leur confèrent une très grande solidité.



# Modèles | Couleurs | Décors\*



Afin de s'assortir à la gamme de coloris des établissements hospitaliers, les lits pour soins de longue durée et de rééducation disposent d'une large palette de couleurs avec des décors unis et des mains courantes « silverline ».

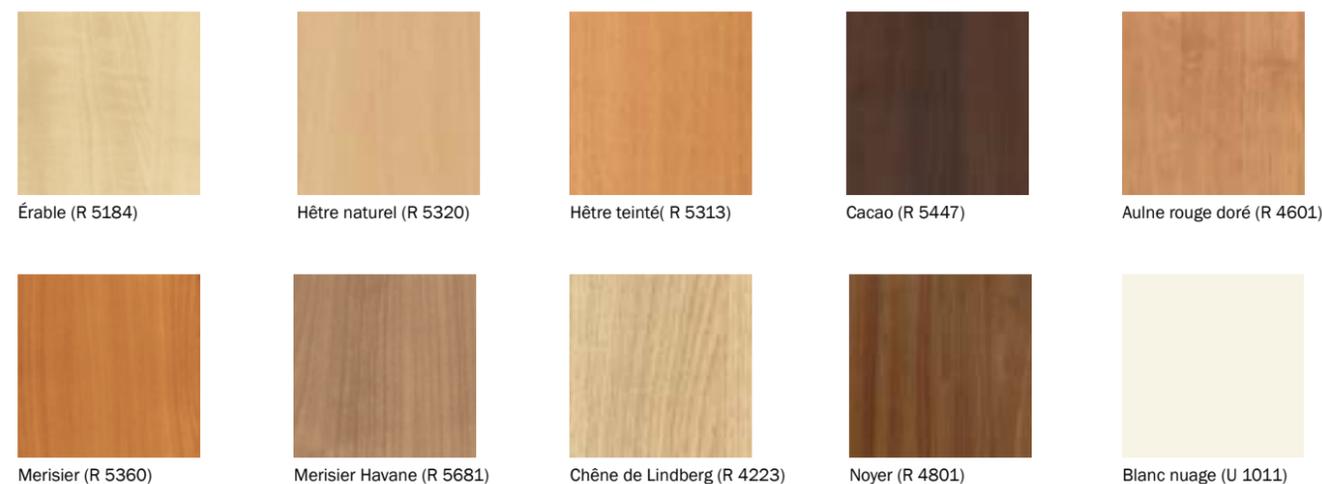

\* Autres décors disponibles moyennant un supplément

# Nos certificats – Votre sécurité

wissner-bosserhoff soumet volontairement et régulièrement ses procédés de fabrication et son management au contrôle de l'organisme allemand de contrôle et de certification TÜV. L'entreprise est ainsi certifiée conforme à la norme DIN EN ISO 9001:2008 pour les systèmes de gestion qualité et à la norme DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 pour la fabrication de dispositifs médicaux.



ISO 9001

ISO 13485

Certification OC

Expertise des barrières latérales de sécurité


Certificat de revêtement antimicrobien




Cachet de contrôle pour la certification produit et l'audit

# Équipements et accessoires

## Dimensions

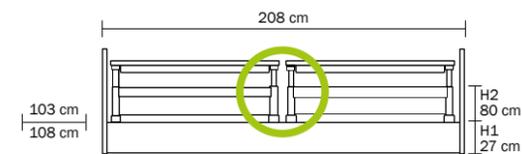


sentida 6 avec demi-barrières latérales (10), sans espaces  
Dimensions extérieures : L = 208 cm, l = 103/108 cm  
Dimensions du matelas : L = 200 cm, l = 87 cm  
H1 27 cm (position basse), H2 80 cm (position haute maximale)

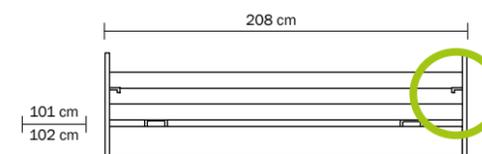


sentida avec barrières pleine longueur 09, avec déclenchement par une poignée pistolet


## Sommiers

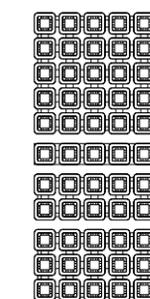

Confort

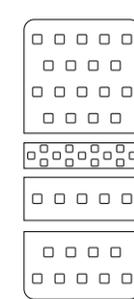


EasyClean

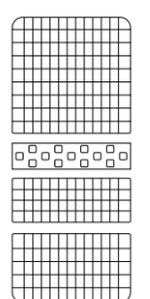


Standard | Aero

# Équipements et accessoires


## Rallonges de sommier

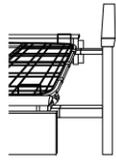


Rallonge de sommier temporaire avec barrières latérales 10 (standard)

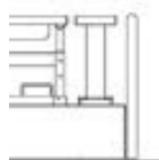


Rallonge de sommier temporaire avec barrières latérales 10 (en option)

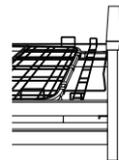

Rallonge de sommier permanente avec barrières latérales 09 (en option)

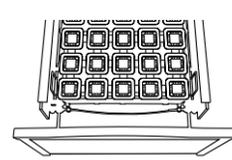

Rallonge de sommier avec déclenchement express (en option)

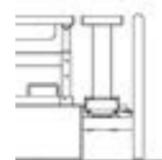

**10-0570 / 10-0580**  
Protection pour rallonge de sommier de 20 cm (en option)

## Options




Protection verticale



Protection verticale et horizontale 3D



Déclenchement CPR sur le relève-buste

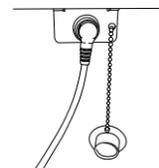

Plug + Play




Boîtier D-Box avec branchement de lampe pour une gestion optimale des câbles




Veilleuse de nuit sous le plan de couchage


## Accessoires SafeSense

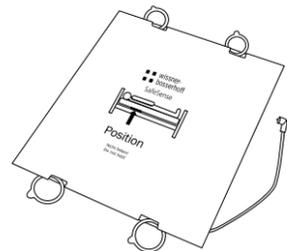

**02-000712**  
Tapis à capteur 50 × 50 cm pour dossier

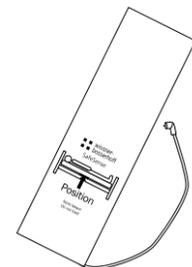


**02-000713**  
Tapis à capteur 80 × 20 cm pour l'assise

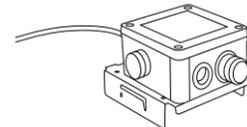


**Solution câble :**  
**04-1544-001**  
Bed-Exit-Box, pour les lits sans batterie  
**04-1544-004**  
Bed-Exit-Box, pour les lits avec batterie

**Solution WiFi :**  
**04-1544-002**  
Bed-Exit-Box, pour les lits sans batterie  
**04-1544-003**  
Bed-Exit-Box, pour les lits avec batterie

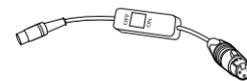


**04-1508**  
Adaptateur pour le branchement sur le système d'appel malade de l'établissement

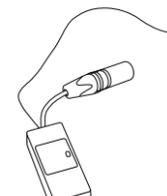


**02-000726**  
Connexion WiFi


## Accessoires

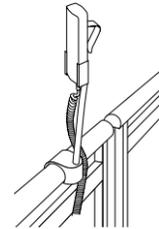


**10-0419**  
Support accessoires pour demi-barrières 10  
**10-0421**  
Support télécommande

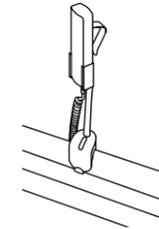


**10-0422**  
Support accessoires pour barrières pleine longueur 09  
**10-0421**  
Support télécommande

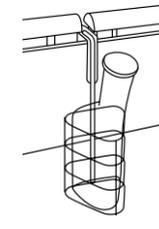

**10-0424**  
Support accessoires et support télécommande  
**50-0165** Porte-pistolet  
**50-0164** Support pour poche à urine (sans ill.)

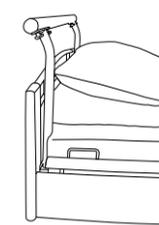

**10-0534**  
Poignée de mobilisation du lit EasyMove

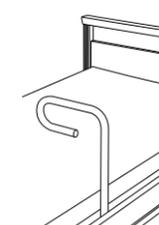


**10-0715**  
poignée de mobilisation pour une aide à l'autonomie du patient



**50-0212** Lampe halogène design soluna avec transformateur 12 V  
**50-0213** Lampe halogène design soluna sans transformateur 12 V  
**50-0237** Lampe LED design soluna avec bloc secteur  
**50-0550** Lampe LED design soluna sans bloc secteur




**50-0206**  
Tapis d'amortissement en cas de chute du lit Larg. 90 × long. 200 cm, épaisseur 4,5 cm environ

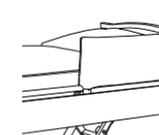


**50-0174**  
Housse pour demi-barrières 10




**50-0338**  
Housse pour barrières pleine longueur 09

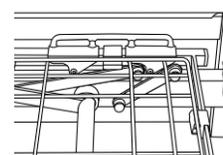


**10-0563/10-0533/10-0521**  
Support Segufix  
- pour le relève-cuisses  
- pour le dossier  
- pour l'assise

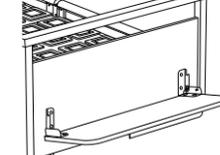

**10-0719**  
Porte-couverture, compatible avec tous les lits

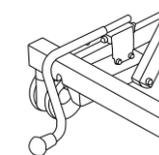

**10-0707**  
Protection murale latérale, sur le châssis bas du lit

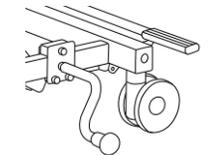

**10-0708**  
protection murale latérale, sur le châssis bas du lit (sentida 5 + 6 uniquement)



L'élégance fonctionnelle au service des soins

**wissner-bosserhoff GmbH**

Hauptstraße 4-6  
D-58739 Wickede (Ruhr)  
Tel.: +49(0)2377/784-0  
Fax: +49(0)2377/784-163  
E-Mail: [info@wi-bo.de](mailto:info@wi-bo.de)  
[www.wi-bo.de](http://www.wi-bo.de)

**wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl**

Bedrijvenlaan 1  
B-2800 Mechelen  
Tel.: +32 (0)15 21 08 41  
Fax: +32 (0)15 29 14 64  
E-mail: [info@wi-bo.be](mailto:info@wi-bo.be)  
[www.wi-bo.be](http://www.wi-bo.be)

**wissner-bosserhoff france**

7, rue Augustin Fresnel  
37170 Chambray-Les-Tours  
Tél : +33 (0) 247 25 02 10  
Fax : +33(0) 247 48 21 06  
E-mail : [info@wi-bo.fr](mailto:info@wi-bo.fr)  
[www.wi-bo.fr](http://www.wi-bo.fr)