

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Functionele elegantie in de verpleging



sentida

Universele, lage verpleegbedden





De perfecte vorm van veiligheid en welzijn

sentida - Universele, lage verpleegbedden

Valpartijen behoren tot de grootste gevaren voor de lichamelijke gezondheid én het psychische welzijn van oudere mensen. Een systematisch voorkomen van vallen speelt daarom in de bejaardenverpleging een doorslaggevende rol en is een belangrijk kwaliteitskenmerk voor verpleegtehuizen. De consequenties voor de gezondheid die het gevolg zijn van vallen, zijn juist bij oudere mensen vaak ernstig en in het ergste geval onomkeerbaar. De angst voor opnieuw vallen is een van de meest voorkomende psychische gevolgen die kan leiden tot beperkte lichamelijke activiteit, een verlies aan zelfvertrouwen en tot sociale isolatie. Met de lage verpleegbedden uit het sentida-programma is wissner-bosserhoff erin geslaagd om de eisen van een moderne verpleging consequent en met name compromisloos om te zetten: optimale veiligheid in combinatie met een geriefelijk design. Innovatieve oplossingen, zoals de unieke 3-traps-strategie en het gepatenteerde SafeFree®-onrusthekkoncept verkleinen de kans op vallen en de gevolgen ervan en stellen maatstaven wat betreft veiligheid, mobiliteit, hoogteverstelbaarheid en geriefelijkheid.

5

miljoen valpartijen
van oudere
mensen per jaar:

Bijna een derde van de 65-plussers en ouderen, evenals de helft van de 80-plussers en ouderen vallen jaarlijks minimaal eenmaal. Alleen al in Duitsland komt het per jaar tot rond 5 miljoen valpartijen bij oudere mensen.

(Bron: Gesundheit und Krankheit im Alter. (gezondheid en ziekte op hoge leeftijd)
Uitgeverij: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/ Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/ Thomas Ziese, Robert Koch-Institut. Berlin 2009)



preventie met
sentida
lage verpleegbedden

Voor het gebruik in inrichtingen met een hoge eis aan universele verpleging en verpleging vlak boven de grond: bejaarden- en verpleeghuizen, verpleegoases, palliatieve afdelingen, dementie- en geriatrieafdelingen en revalidatieinrichtingen.

Woonconcept

sentida | Design G10





Materiaal- en kleurkeuze volgen de huidige, natuurlijke woontrend. Zo ontstaat een geriefelijke, warme sfeer waarin bewoners zich veilig en geborgen voelen.

Het sentida-portfolio

Het instapmodel



De mobiele



Model

sentida 1

sentida 3

Verrijdbaarheid

In de lage positie

In elke bedhoogte

Wielen

Vier dubbele loopwielen van 50 mm

Bij het voeteinde vier dubbele loopwielen van 50 of 75 mm, bij het hoofdeinde twee bokwielen van 100 of 160 mm

Rembaarheid

Elektrische rem per handschakelaar

Elektrische rem per handschakelaar
rembeugel bij het voeteinde

Veilige werklust

225 kg

225 kg

Hoogteverstelling

25-80 cm

25-80 cm

De flexibele



sentida 4

In elke bedhoogte

Dubbele loopwielen van 50 of 75 mm

Rembeugel bij het hoofd- en het voeteinde

225 kg

25-80 cm

De geriefelijke



sentida 5

In elke bedhoogte

Dubbele loopwielen van 50 mm volledig bekleed door geriefelijke chassis

Pedaalrem per as met centrale rem op twee wielen



27-80 cm

De extra mobiele



sentida 6

In elke bedhoogte

Lichte loopwielen van 100, 125 of 150 mm of dubbele loopwielen resp. designwielen van 125 mm

Rembeugel aan voeteinde met centrale blokkeerrem op vier wielen



27-80 cm met 100 mm lichte loopwielen
29,5-82,5 cm met 125 mm lichte loopwielen
28-81 cm met 125 mm dubbele loopwielen resp. designwielen
32-85 cm met 150 mm lichte loopwielen





meer dan
500.000 maal
in de praktijk getest

Alle voordelen in één oogopslag



Bescherming en mobiliteit zonder VBM*

SafeFree® - het gepatenteerde onrusthekkensconcept | 12 - 13

Dag en nacht veilig

SafeSense® - de intelligente Bed-Exit-Sensoren | 14 - 15

Veilig verplegen, mobiliseren en slapen

3-traps-strategie | 16

Flexibiliteit en tijdbesparing

3 bedlengtes zonder gereedschap instelbaar | 17

Effectieve voorkoming van doorligwonden

Dubbele retractie | 3 ligvlakken naar keuze | 18 - 19

Intuïtieve bediening

Overzichtelijk en ergonomisch | 20 - 21

Energie-efficiëntie en belastbaarheid

Innovatief aandrijvingssysteem | 22 - 23

Wij denken vooruit

memoriana | Ruimteconcept voor mensen met dementie | 24 - 25

Overige mogelijkheden

Design | Kleuren en decors | Opties en accessoires | vanaf 26

Woonconcept

sentida | Design Ts10



Materiaal- en kleurkeuze volgen de huidige, natuurlijke woontrend. Zo ontstaat een geriefelijke, warme sfeer waarin bewoners zich veilig en geborgen voelen.



Bescherming en mobiliteit zonder VBM^{*}

SafeFree[®] - het gepatenteerde onrusthekkensysteem

Het gedeelde onrusthekkensysteem SafeFree[®] is gepatenteerd, vrijwillig gecertificeerd en meer dan 500.000 keer in de praktijk getest. Het systeem is eenvoudig, snel en ruimtebesparend, kan in 2 seconden worden ingeklapt en kan apart worden ingesteld op 4 verschillende hoogtes, afhankelijk van de verpleegomstandigheden en lengte van de bewoner.

1

Geen bescherming nodig



In neergelaten toestand bieden de gedeelde onrusthekken behalve een geriefelijke uitstraling ook een vrije toegang tot de bewoner voor de dagelijkse verpleging. Storende accessoires, zoals middenstijlen of vast gemonteerde zijpanelen hoeven niet te worden verwijderd en opgeborgen.

2

Passieve bescherming

(geen VBM^{*})



Voor de veiligheid 's nachts is het vaak voldoende om de lage positie van het bed te combineren met de eerste uittrekkfase van het onrusthek aan het hoofdeinde. Dit voorkomt overbodige barrières en zorgt toch voor een aanzienlijk lager risico op uit bed vallen. Bewoners behouden zo hun oriëntatie, zonder dat ze beperkt worden.

3

$\frac{3}{4}$ -bescherming (geen VBM^{*})



Dit beschermingssysteem omvat een bewuste uitstapopening aan het voeteinde ter vermindering van de vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) en biedt tegelijkertijd een bijzonder hoog niveau van veiligheid.

4

Volledige veiligheid (VBM^{*})

voor matrassen tot 18 cm dik



De bovenste positie dient voor de uitgebreide beveiliging van de bewoner. Beide delen van de onrusthekken sluiten zo nauw op elkaar aan, dat ze net zo veilig zijn als een doorlopend zijrooster. Zo doende voldoen de hekken aan de norm IEC 60601-2-52. Accessoires voor het sluiten van een middenopening bij de fixatie met buikgordels zijn dus niet nodig.



De bevestigingen kunnen nog 6 cm hoger worden ingesteld zodat ook hogere matrassen goed passen.

Veilig mobiliseren


De gedeelde onrusthekken kunnen zeer effectief worden gebruikt bij de mobilisatie omdat ze goed vastgepakt en vastgehouden kunnen worden. Op deze manier fungeren ze als een betrouwbare opstahulp en bevorderen zo de mobiliteit van de bewoner.




Verpleging met 4 gedeelde onrusthekken

= volledige toegang

- Flexibel gebruik van het bed in nissen voor standaardverpleging
- Flexibele toegang aan beide zijden bij meer behoefte aan verpleging
- Flexibel gebruik van het bed voor bewoners die links/rechts opstaan ten behoeve van de mobilisatie
- Vermijding van bijkomende kosten bij het achteraf aanbrengen van gedeelde onrusthekken

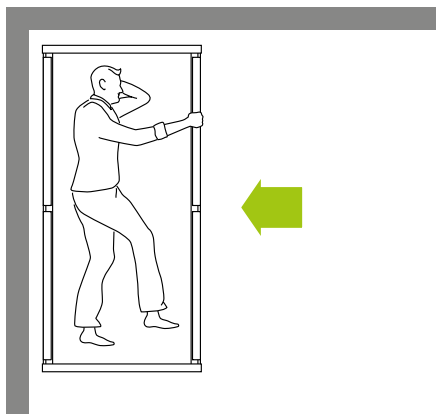

Standaardverpleging –
toegang voor verpleging vanaf een zijde voldoende

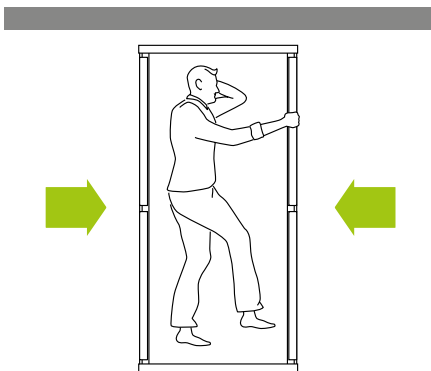


Meer behoefte aan verpleging –
toegang voor verpleging aan beide zijden nodig



Meer veiligheid
door kleine midden-
opening* < 60 mm

- Doelbewust overeenstemming met de nieuwe norm IEC 60601-2-52
- Veiligheid in de werkpositie, d.w.z. ook met omhooggebrachte rug- resp. beensteun
- Veiligheid zonder gebruik van een extra middenopenings-protector als accessoire bij de fixatie met buikgordels conform de aanbeveling van BfArM**

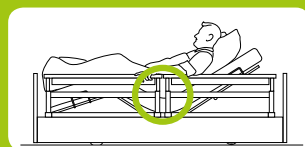

Video's over
het onrusthekken-
concept:



Dag en nacht veilig

SafeSense® - de intelligente Bed-Exit-Sensoren

wissner-bosserhoff - uw betrouwbare partner bij het minimaliseren van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM): meer veiligheid voor de bewoner, hogere zorgkwaliteit maar nooit ten koste van de zelfredzaamheid. Gebruik ons innovatieve Bed-Exit-Systeem en minimaliseer zo vrijheidsbeperkende maatregelen. Het systeem is uitgerust met een automatisch nachtlicht dat tijdens het opstaan uit bed wordt ingeschakeld en dat weer dooft zodra de patiënt weer in bed ligt. SafeSense® is compatibel met de gebruikelijke verpleegstersignaalssystemen op de markt. Verpleegbedden van wissner-bosserhoff vanaf 2002 kunnen hiermee worden uitgebreid of achteraf worden uitgerust.



Meer veiligheid –
minder VBM*

- snellere reactietijd bij vallen
- hoger veiligheidsniveau bij nacht- en weekenddiensten
- ideaal in combinatie met sentida lage verpleegbedden en SafeFree®-onrusthekken



Video SafeSense®

Automatisch nachtlicht

- nachtlicht wordt bij het verlaten van het bed automatisch geactiveerd
- nachtlicht dooft zodra de bewoner weer in bed ligt

Instelbare timer voor oproep zorgverlener

- flexibel en traploos instelbaar van 0 sec. directalarm tot 30 min.
- aanpassing aan de mogelijkheden van de bewoner

Geïntegreerd of als inbouwpakket achteraf

- accessoire-optie voor actuele WIBO-verpleegbedden
- inbouwpakket achteraf voor elektrische WIBO-verpleegbedden vanaf 2002
- als draadloze of bedrade oplossing leverbaar




Veilig verplegen, mobiliseren en slapen

3-traps-strategie

IVS = Intelligent-Verticaliserings-Systeem heeft niet alleen een groot hoogteverstelbereik van 27 tot 80 cm, maar beschikt bovendien dankzij een intelligente regeling over bescherming bij aanstoten bij het instellen van de comfortzitpositie. Dat wordt met name in combinatie met de bedverlenging tot 220 cm een essentieel voordeel.


80 cm

Optimale verpleegpositie

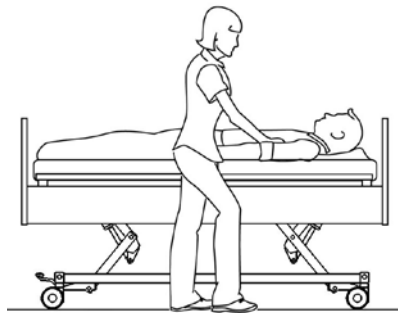

41 cm*

Veilige mobilisatie op stoelhoogte

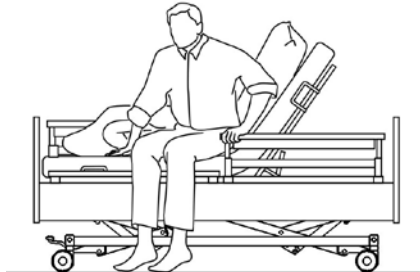

27 cm*

Voorkomen van vallen in de slaapfase



IVS –
Intelligent
Verticaliserings-
Systeem

- Comfortabel verstelbereik 27-80 cm
- Eerste tussenstop bij het uit bed stappen op stoelhoogte op 41 cm
- Stootbescherming bij instelling van de comfortzitpositie vanuit de lage positie en bij gebruik van een bedverlenging

Flexibiliteit en tijdbesparing

3 bedlengtes zonder gereedschap instelbaar

Alle verpleegbedden van wissner-bosserhoff beschikken standaard over een geïntegreerde bedverlenging. Door de **express-bedverlenging** (zie afb. onder/optie) kan sentida met **gedeelde onrusthekken** flexibel en zonder gereedschap voor verschillende bedlengtes worden aangepast. Daarbij worden in elke configuratie de richtlijnen van de nieuwe norm IEC 60601-2-52 aangehouden.


200 cm

Bedlengte 200 cm: De gedeelde onrusthekken bieden bescherming zonder middenopening > 318 mm* en zonder protector





210 cm

Alternatieve bedlengte 210 cm: Bescherming met langere onrusthekken aan het voeteinde zonder accessoires en zonder opening > 318 mm**

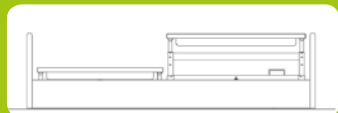

220 cm

Bedverlenging tot 220 cm: is bij sentida met gedeelde onrusthekken tijdelijk instelbaar – volledige bescherming wordt door protector (accessoire) aan voeteinde gegarandeerd

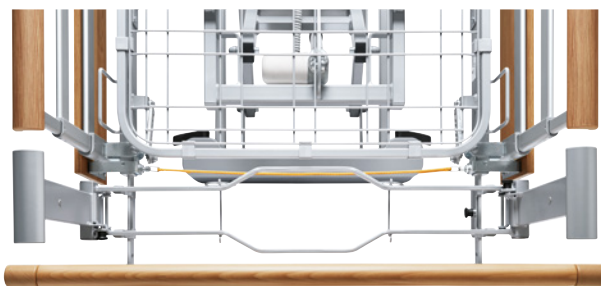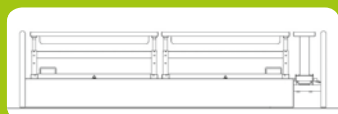

Bedverlenging met expressontgrendeling (optie)


Effectieve voorkoming van doorligwonden

Dubbele retractie | 3 ligvlakken naar keuze


De ergonomische verdeling van het ligvlak draagt bij tot vermindering van drukbelastingen en zodoende tot vermindering van doorligwonden. De maten van de in vier gedeeltes verdeelde ligvlakken van de wissner-bosserhoff verpleegbedden zijn afgestemd op de inzichten van de antropometrie, d.w.z. naar de gemiddelde

lichaamsmaat van een mens. Op basis van de inzichten van prof. Eigler wordt duidelijk dat het rugsteungedeelte voor een effectieve ondersteuning van de halswervelkolom minimaal 80 cm lang moet zijn. Een extra verlaging van de drukbelasting bereikt het BiNetic-ligvlak bij bovengemiddeld lange bewoners

door zijn geïntegreerde bedverlenging: met de gereedschapsloze express-bedverlenging kan het ligvlak tijdelijk - of met verlengingsinzetelement ook permanent worden - verlengd tot 220 cm, waarmee voorkomen wordt dat de benen het voeteinde raken.

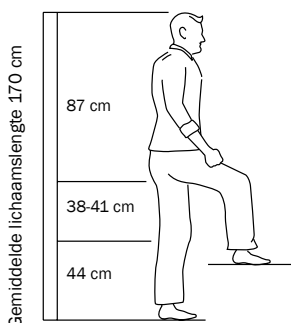

Antropometrie volgens Prof. Eigler*

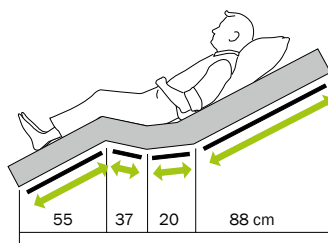


BiNetic-ligvlak 200 cm (lange rugleuning)

Modulair ligvlak


U heeft de keuze uit drie verschillende ligvlakken:

- Het roosterligvlak Aero (01) zorgt voor een goede ventilatie.
- De kunststof steunvlakken van het Easyclean-ligvlak (02) zijn heel eenvoudig te reinigen.
- Het Comfort ligvlak (03) 55 veerelementen en bevordert niet alleen het ligcomfort, maar biedt ook een waardevolle bijdrage ter voorkoming van doorligwonden (a).

Over het algemeen zijn de ligvlakdelen eenvoudig te reinigen en verwijderbaar (b).

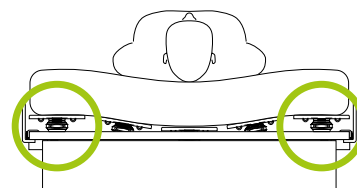

Comfortligvlak met 55 veerelementen

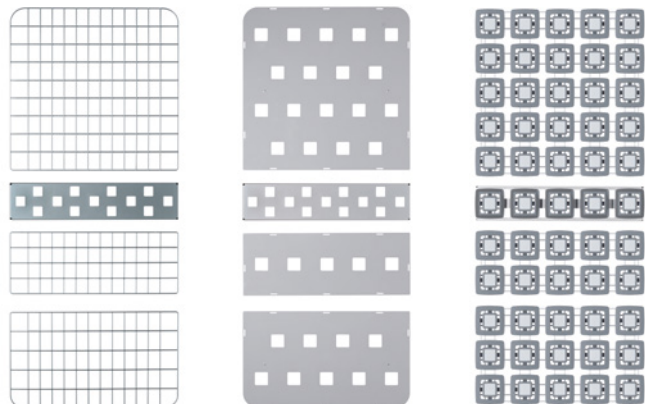

01

02

03



Details comfortligvlak


Werking van de dubbele retractie aangetoond

wissner-bosserhoff volgt reeds vele jaren een bruikbaar concept voor het verminderen van risico's: de dubbele retractie als bestanddeel van het BiNetic-ligvlak. Bij de dubbele retractie wordt niet alleen de rugleuning, maar ook de beensteun van het zitgedeelte ingetrokken, zodat het oppervlak

wordt vergroot. Intussen zijn ook de resultaten van de drukmetingen (thermografieën) bekend, waaruit duidelijk valt op te maken dat de drukbelasting bij dubbele retractie lager is dan bij de enkelvoudige retractie en aanzienlijk lager is dan bij een standaardligvlak.




WIBO-ligvlak met duidelijke belastingvermindering

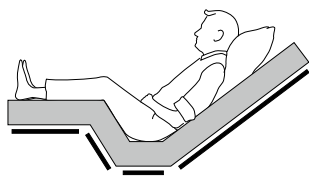

6 cm ← → 11 cm


Dubbele retractie = voorkoming van doorligwonden

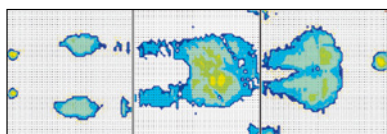


Thermografie van het BiNetic-ligvlak



Standaardligvlak zonder belastingvermindering

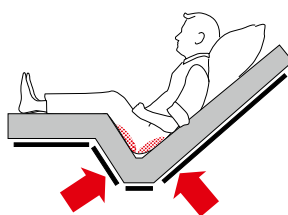

Enkelvoudige retractie = risico op doorligwonden

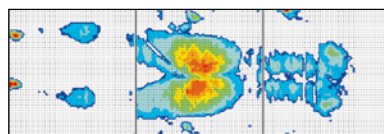

Thermografie van een standaardligvlak

Tot wel

2,7

miljoen mensen

in Duitsland leiden aan chronische wonden, zoals doorligwonden. Met name vanwege demografische veranderingen zijn het vooral ouderen die last hebben van chronische wonden.

Bij ouderen van 90 jaar of ouder ligt het risico hierop rond de 11%.

Doorligwonden zijn bijzonder ingrijpend voor bewoners.

Therapie neemt meestal meerdere weken of maanden in beslag en kan bovendien aanvullende klachten veroorzaken.

Bron: Onderzoek BVMed 2012



Dubbele retractie =

17cm


meer ruimte in bed!

Intuïtieve bediening


Overzichtelijker en ergonomischer

De handschakelaar van de sentida verpleegbedden in eerste instantie door zijn overzichtelijkheid en de ergonomische vormgeving: minder toetsen en grote symbolen zorgen ervoor dat de bediening intuïtief te leren is.

Dankzij de voorkeuzetoetsen is de handschakelaar veilig in gebruik: het activeren van een functie door het onopzettelijk indrukken van een toets is uitgesloten.

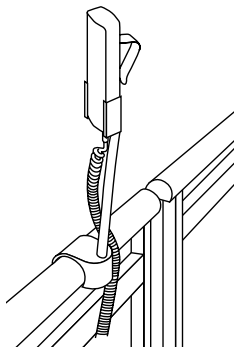

Altijd goed bereikbaar voor bewoners en personeel (accessoire handschakelaarhouder, model 10-0419 en 10-0421).

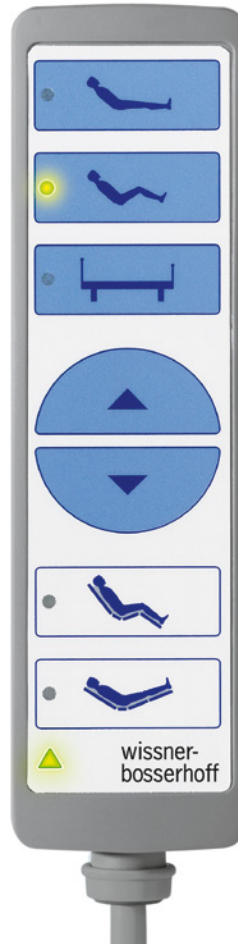

Rugsteunverstelling

Autocontour

Hoogteverstelling

Omhoog

Omlaag

Comfortzit-automatiek

Automatische lighoudingsregeling



Uitgebreide functionaliteit

- Nachtlampje en leeslampje
- Aparte beensteunverstelling
- Mobilisatiefunctie
- Beveiliging tegen onopzettelijk gebruik



Instructievideo's zijn ook beschikbaar via:
www.wi-bo.com/de/Ueberuns/Anleitungsvideos

Drie veiligheidsniveaus

Aan de achterzijde van de handschakelaar is een blokkeerfunctie geïntegreerd. Men hoeft dus niet te bukken en te zoeken naar een blokkeerbox die op de balk van het ligvlak is aangebracht.

Via een magneetvrije sleutel kunnen drie handschakelaarmodi worden ingesteld:

Verpleegmodus:

alle keuzetoetsen zijn vrijgegeven.

Blokkeermodus:

alle functies van de handschakelaar zijn geblokkeerd.

Bewonermodus:

de bovenste drie kunnen door de bewoner worden gebruikt.



Verpleegmodus



Blokkeermodus



Bewonermodus



Sleutel voor veiligheidsniveau (magneetvrij)

De automatische posities van de sentida die met slechts één druk op de knop in te stellen zijn, ondersteunen het positioneringscomfort en het voorkomen van doorligwonden – voor het welzijn van de bewoner en ter ontlasting van het verplegend personeel.

Probleemloos tv kijken, lezen of ontbijten in bed dankzij de automatische inrichting voor comfortabel zitten

De vooringestelde zitpositie van het bed is geschikt voor gezellig tv-kijken en het lezen, om te eten of om op ooghoogte te communiceren. Mobilisatie met de lifter wordt in deze positie effectief ondersteund. Bovendien verlicht deze positie de ademhaling, evenals de spijsvertering en bij bedlegerige bewoners wordt de ruimtelijke waarneming getraind en de bloedsomloop gestimuleerd. De dubbele retractie zorgt bovendien voor een drukontlasting in het sacrale gebied.



Voorkoming van doorligwonden en vrijleggen van de hielen met behulp van het automatische ligstelsel

De vooraf ingestelde hoge beenstand ondersteunt de ontstopping bij aderaandoeningen en heeft tegelijkertijd een gunstige invloed op het voorkomen van doorligwonden. De 1/2 Fowler-30°-lithouding met knieverhoging staat garant voor een gering risico op doorligwonden* door de gunstige gewichtsverandering in de zitvlakzone, het gebied met de meeste bedreiging.



Energie-efficiëntie en belastbaarheid

Innovatief aandrijvingssysteem

Omdat de verpleegbedden sentida 5 en 6 zijn uitgerust met een nieuwe motor zijn ze nu nog gebruiksvriendelijker, meer belastbaar en energie-efficiënter. Dankzij de geïntegreerde led-technologie, de energiebesparende uitvoering en het servicegerichte ontwerp voldoen deze bedden gegarandeerd aan de essentiële voorwaarden voor economisch gebruik in een verpleeghuis.

Gebruiksvriendelijker



In de motor van de nieuwe sentida 5|6 is een aansluiting geïntegreerd voor een led-bedlampje. Het bed hoeft dus alleen maar verbonden te worden met het lichtnet. Het led-lampje kan nu ook met de handschakelaar worden bediend. Ook nieuw zijn de speciale video's met instructies voor bediening van het bed. Deze kunnen worden bekeken door de QR-code te scannen die op elk bed is aangebracht.



Instructievideo's zijn ook beschikbaar via:
www.wi-bo.com/de/Ueberuns/Anleitungsvideos

Belastbaar en veilig

De nieuwe motor levert bijzonder krachtige prestaties. Vooral bij grote belasting komen zijn sterke punten goed uit de verf. Het bed biedt een veilige werklast tot wel 270 kg (sentida 5|6) en kan een maximaal bewonersgewicht dragen van 235/255 kg (afhankelijk van de accessoires).



Economisch en energie-efficiënt

Omdat stroomkosten voortdurend stijgen, wordt energie-efficiëntie steeds belangrijker. De nieuwe motor verbruikt in stand-by-stand slechts 0,5 W en is zo doende bijzonder zuinig. Optimaal kabelmanagement zorgt ervoor dat slijtage tot een minimum wordt beperkt. De aansluitkabel is apart verwisselbaar, waardoor minder kosten gemaakt hoeven te worden voor opslag.

Hoeveel impact het verbruik van verpleegbedden in stand-by-modus kan hebben op de totale kosten, is goed te zien in de volgende voorbeeldberekening:



Product	Stand-by-verbruik	Stroomkosten gedurende 15 jaar*
De NIEUWE sentida	0,5 W	€ 1.950
Bed A	3,76 W	€ 15.345
Bed B	2,5 W	€ 10.200
Bed C	1,7 W	€ 6.900

*Voorbeeld: Instelling met 100 bedden

soluna

Design-leeslamp

Het bijzondere designelement van de soluna-lampen is de elegante lampenkap met zijn deels doorschijnende karakter. Dankzij de draaibare arm kan het lichtpunt van de lamp nauwkeurig in de buurt van het te verlichten object worden gepositioneerd. Daarnaast vormt de lamp een harmonische combinatie met de ergonomie van het bed.

Voordelen van de led-uitvoering: lange levensduur, laag energieverbruik, geen warmteontwikkeling en een absoluut veilige werking.



Met de variabel positioneerbare lamp-armatuur en de individueel instelbare lichtrichting is soluna zowel geschikt als lees- en bedlampje.



soluna met golvende lampenkap



soluna met effen lampenkap




100

verschillende oorzaken

Dementie kan wel tot wel 100
verschillende oorzaken hebben.

Net zo ingewikkeld als de
oorzaken en veroorzakers
is het verloop, dat van de ene
tot de andere getroffen
totaal verschillend kan zijn.

Bron: : www.bmg.bund.de
Duits Ministerie voor Volksgezondheid

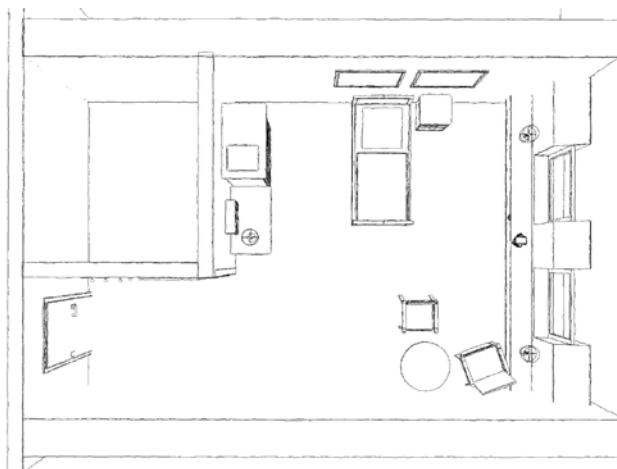

Nadere informatie over memoriana, ons ruimteconcept voor dementie,
kunt vinden in de afzonderlijke brochure. U kunt ook per e-mail contact
met ons opnemen: sales@wi-bo.eu



Wij denken vooruit

memoriana | Ruimteconcept voor mensen met dementie

De adequate begeleiding van mensen met dementie is een bijzondere uitdaging voor verpleegkundigen en familieleden. wissner-bosserhoff heeft in samenwerking met dementiedeskundigen in Groot-Brittannië en Duitsland een ruimteconcept voor mensen met dementie ontwikkeld. Speciaal gericht op de behoeften van de betrokkenen, biedt het nieuwe concept een wezenlijke ontlasting in de begeleiding en verzorging. Centraal in de ontwikkeling staan de doelstellingen voor de begeleiding van demente bewoners:



Oriëntatie verbeteren

Aan de bewoners worden chronologische, kleurrijke en ruimtelijke oriëntatiepunten aangeboden. De gerichte integratie van kleuren, vormen en voorwerpen helpt bij de ruimtelijke waarneming - angsten en frustraties worden verminderd.



Zelfstandigheid verhogen

Hoe zelfstandiger de bewoner zich in zijn omgeving kan bewegen, des te meer wordt ook het verplegend personeel ontlast. Functionele inrichtingselementen zoals handleuningen en open opbergvlakken, stimuleren de mobiliteit en zelfstandigheid van de bewoners met dementie. Andere gebieden in de kamer zijn daarentegen alleen toegankelijk voor de begeleiders.



Veiligheid maximaliseren

De veiligheid van de bewoners is een centraal aspect. Lage verpleegbedden met onrusthekken, handleuningen aan het meubilair en wanden, evenals visuele oriëntatiehulpen, bieden de bewoners met dementie een maximum aan veiligheid zonder merkbare beperkingen.



Design | Hoofd-/voeteinde



Design A
hoofd-/voeteinde



Design A
hoofd-/voeteinde



Design A
hoofd-/voeteinde



Design D
hoofdeinde



Design D
voeteinde



Design D
vlak voeteinde



Design Df
hoofdeinde



Design Df
voeteinde



Design Df
vlak voeteinde



Design G
hoofdeinde



Design G
voeteinde



Design G
vlak voeteinde



Design K
hoofdeinde



Design K
voeteinde



Design K
vlak voeteinde



Design T
hoofdeinde



Design T
voeteinde



Design T
vlak voeteinde



Design Ts
hoofdeinde




Design Ts
voeteinde



Design Ts
vlak voeteinde

Kleuren | decors^{*}

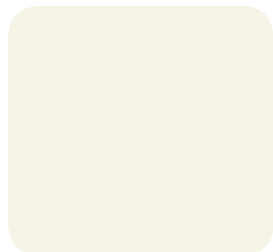

Vulkaanwit (U11502)



Berkenhout (R35018)



Lindberg-eiken (R20021)



Cottage pijnboomhout (R55023)



Pijnboomhout Suomi grijs
(R55022)



Pijnboomhout Suomi bruin
(R55021)



Kersen Havanna (R42006)



Acacia donker (R38006)



Beuken naturel (R24015)



Beuken (R24034)



Kersen (R42001)

Kleurencombinatie memoriana^{**}

Combinatiemogelijkheid 1



Ombouw Berkenhout
Omlijsting kersen Havanna

Combinatiemogelijkheid 2



Ombouw kersen Havanna
Omlijsting Cacao


Combinatiemogelijkheid 3




Ombouw Pijnboomhout Suomi grijs
Omlijsting Pijnboomhout Suomi bruin

Opties en accessoires

Afmetingen

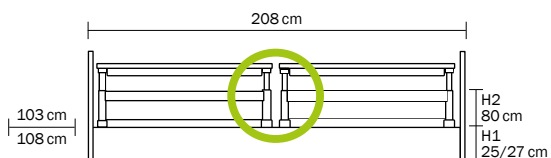


sentida met gedeelde onrusthekken (serie 10), zonder opening
Externe afmetingen: L = 208 cm, B = 103/108 cm
Matrasmaat: L = 200 cm, B = 87 cm
H1 25/27 cm (lage positie), H2 80 cm (hoogste positie)

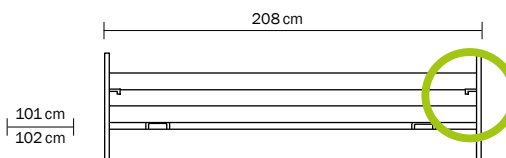


sentida met doorlopende, 2-voudige
onrusthekken serie 09 met pistoolontgrendeling


Ligvlakken

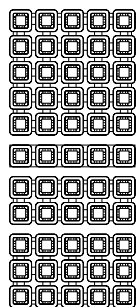

Comfort

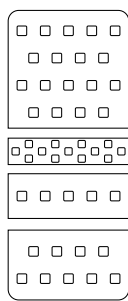


EasyClean

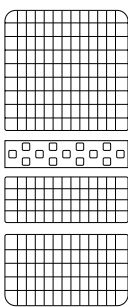


Standaard | Aero


Bedverlengingen

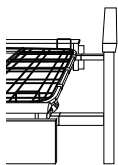


Tijdelijke bedverlenging onrusthek serie 10 (standaard)

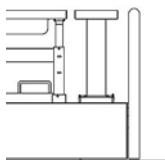


Permanente bedverlenging onrusthek serie 10 (optie)

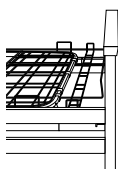

Permanente bedverlenging onrusthek serie 09 (optie)

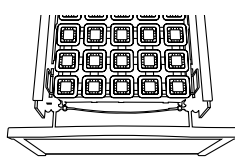


Bedverlenging met expressontgrendeling (optie)

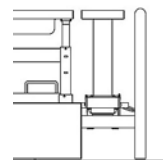

10-0570 / 10-0580
Protector voor bedverlenging met 20 cm (optie)


Opties

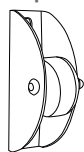


Verticale wandafstands-
wielen




3D-wandafstandswielen
horizontale en verticale
functie

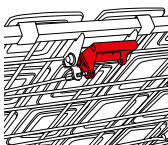

Ontgrendeling CPR
aan de rugsteun

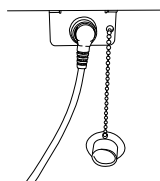


Plug + Play voor gebruik
van de handschakelaar aan
één of beide bedzijden

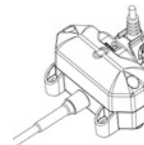

Onderbed-
verlichting
(schakelbaar)

Accessoires

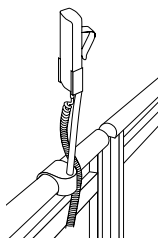


10-0419

Handschakelaar voor gedeelde onrusthekken

10-0421

Handschakelaarhouder, kort

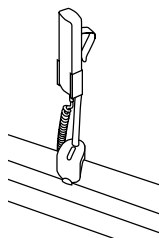


10-0422

Accessoire- en handschakelaarhouder voor doorlopende onrusthekken

10-0421


Handschakelaarhouder, kort

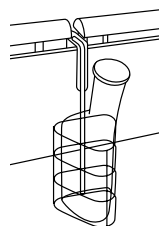

10-0424


Accessoire- en handschakelaarhouder voor montage aan het zij-element

50-0164 Urinezakhouder (zonder afb.)

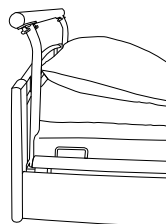


10-0534

Transportgreep EasyMove

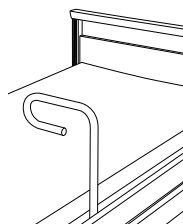

10-0715

Opstahulp voor onrusthekken serie 09 en evenals ¾-onrusthekken

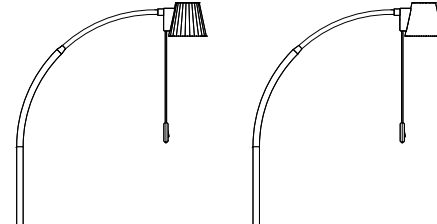

50-0237 Design-halogenelamp soluna met netadapter

50-0550 Design-led-lamp soluna zonder netadapter


50-0547 Design-led-lamp soluna met effen lampenkap exclusief netadapter



50-0206


Valmat

B 90 x L 200 cm, hoogte ca. 4,5 cm

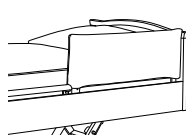


50-0174

Gestoffeerde bescherming voor gedeelde onrusthekken serie 10

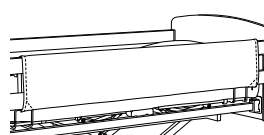

50-0338

Gestoffeerde bescherming voor serie 09, 2-delige onrusthekken

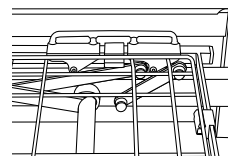


10-0563/10-0533/10-0521

Segufix-bevestiging

- voor bovenbeensteun


- voor de rugsteun

- voor het zitgedeelte

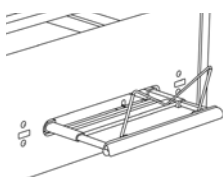


10-0617

Geïntegreerd design-beddengoedrek
Compatibel met alle bedden (uitgezonderd de 09-serie 3-voudige onrusthekken en Design A-kk)

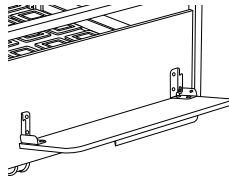


10-0719

Beddengoedrek, compatibel met alle bedden

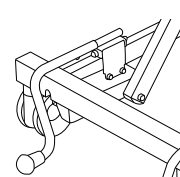

10-0707

Wandafstandshouder kort aan hoofdeinde (alleen sentida 5 + 6)

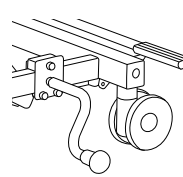


10-0708

Zijdelingse wandafstandshouder (alleen sentida 5 + 6)


Accessoires | SafeSense® Bed-Exit-Systeem

SafeSense® Sensormat 2

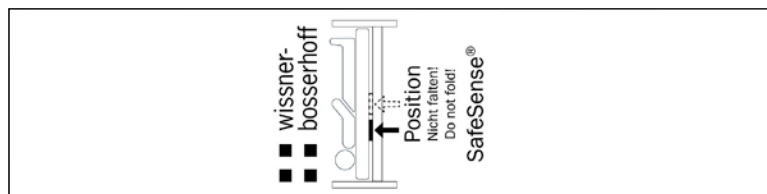


02-000876
SafeSense®-sensormat 2
80 x 20 cm


SafeSense® Bed-Exit-Box 2

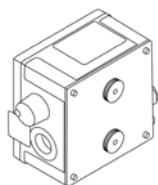

04-1851
Met universele bevestiging
Verkrijgbaar als kabel- of
draadloze uitvoering

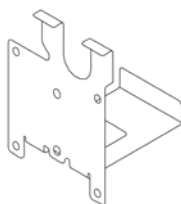


01-011193
Plaat voor DU09-motor

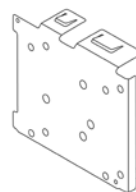

01-011194
Plaat voor Q7-motor

SafeSense® Aansluitkit

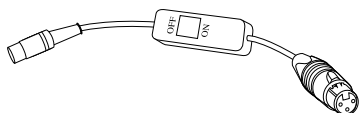

04-1508
Adapterkabel met aan-/uitschakelaar en
bijpassende stekker voor aansluiting op
de meldinstallatie (klantspecifiek) voor de
kabeluitvoering en draadloze uitvoering



04-1608
Adapterkabel zonder aan-/uitschakelaar,
met bijpassende stekker voor aansluiting
op de meldinstallatie (klantspecifiek) voor
de kabeluitvoering en draadloze uitvoering

Onze certificaten – uw veiligheid

wissner-bosserhoff laat regelmatig haar productieprocessen en het management vrijwillig door TÜV doorlichten.

De onderneming is gecertificeerd volgens de bepalingen van de DIN EN ISO 9001:2008 voor kwaliteitsmanagement-systemen, evenals van de DIN EN ISO 13485:2003+AC:2007 voor de fabricage van medische hulpmiddelen.



ISO 9001:2008




EN ISO 13485:2012



ISO 14001:2004



ISO 50001:2011

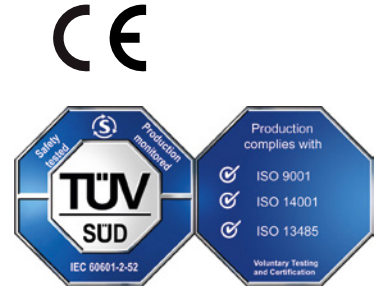

Keurmerk voor productcertificering en auditering



CB-certificaat



Attest voor
onrusthekken



Keuringsrapport voor
antimicrobiële coating

Design

wissner-bosserhoff besteedt veel aandacht aan het design. De producten verbinden niet alleen functionaliteit aan hoogwaardige uitvoering, maar ook aan design op het hoogste niveau. Zij worden gekenmerkt zowel door hoge functionaliteit en een geriefelijke vormgeving als door een aangename bediening en ergonomie. Daarvoor heeft sentida al meerdere gerenommeerde designonderscheidingen ontvangen en behoort daarmee volgens internationale maatstaven tot de belangrijkste verpleegbedprogramma's.



red dot design award
winner 2014



red dot design award
winner 2015



Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Belgium bvba/sprl

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen

Tel. +32 15210841 | Fax +32 15291464

info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Amstelwijckweg 2 | 3316 BB Dordrecht

Tel. +31 78 6521850 | Tel. +31 78 6521855

sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl



wissner-bosserhoff Germany