

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Functionele elegantie in de verpleging

NIEUW
Het digitale
verpleegbed

sentida 7-i



Het gekoppelde verpleegbed

Hoe digitale technologie de verpleging duurzaam ontlast

sentida 7-i



Digitalisering met sentida 7-i

360° gekoppelde verzorging Tijd besparen tot een waarde van twee voltijd verpleegkrachten	4 - 5
10 goede redenen Met sentida 7-i digitaal doorstarten	6 - 7
1 Verplegingsdocumentatie live Rechtstreekse invoer in plaats van schriftelijke notities	8
2 Systeemveiligheid Gesloten systeem met toegangsmanager	9
3 Gewichtsbewaking met touchscreen Tijdwinst door wegen in bed	10
4 BMI-check Vroegtijdig vaststellen van ondervoeding al voor een artsenbezoek	11
5 Bed-Exit-manager Vroegtijdig waarschuwingssysteem al voor het opstaan	12
6 Connectivity Gereed voor uw infrastructuur	13
7 Multi-oproep Gekwalificeerde oproepen voor de juiste prioriteiten	13
8 Veiligheidssensoren Voor het welzijn van uw bewoners	14
9 Mobi-Lift® Voor zelfmobilisatie	15
10 Vochtighedsassistent Sensorische mat met oproepfunctie	16

Meer voordelen van de sentida 7-i

Bewonerscomfort en -veiligheid SafeControl - verlichte designhandbediening	17
Zorg op de intensive care en verpleging van ernstig zieken Spoedverplegingspakket	18
Effectieve decubituspreventie Ligvlakergonomie Dubbele retractie	19
Bescherming en mobiliteit zonder VBM* SafeFree® - het gepatenteerde bedhekkenconcept	20 - 21
Veilig verplegen, mobiliseren en slapen 3-traps-strategie	22
Flexibiliteit en tijdsbeparing 3 bedlengtes zonder gereedschap instelbaar	23

Modellen en designs

Keuze uit 2 modellen	26
CareBoard® Keuze uit 2 posities	26
Design Hoofd-/voeteinden	27
Kleuren decors	28
Kunstleder- en stofbekleding	29
Uitvoeringen en accessoires	30 - 31

360° gekoppelde verzorging

Tijd besparen tot een waarde van twee voltijd verpleegkrachten*

Digitalisering en het tekort aan verplegend personeel zijn veelbesproken onderwerpen. sentida 7-i biedt uitkomst.

sentida 7-i biedt u betrouwbare oplossingen voor het ontlasten van uw verplegend personeel, zoals het nieuwe hulpmiddel voor verplegingsdocumentatie direct aan het bed. Het invoeren en overdragen via het CareBoard® bespaart vele briefjes en wandelingen naar de pc, zodat waardevolle verpleeg-tijd tot maximaal 5 minuten per bewoner kan worden gewonnen. Net zoals bij de geïntegreerde bedweegschaal, die ten opzichte van het verplaatsen naar een rolstoel met aansluitend transport naar een weegschaal tot 15 minuten per weegmoment kan besparen.

In totaal betekent dit bij 100 bewoners een tijdsbesparing van maximaal 3.400 uren per jaar, wat overeenkomt met de werktijd van ten minste twee voltijd verpleegkrachten.


De nieuwe digitale functies ontlasten dus niet alleen de verpleging, maar dragen ook bij aan een hogere efficiëntie van uw instelling. Deze functies maken gebruik van de strengste beveiligingsnormen en besparen waardevolle verpleegtijd ten gunste van uw bewoners – Voor een menselijke verpleging 4.0.

Tijd besparen
met een waarde tot
2
voltijd
verpleegkrachten



10 goede redenen

Met sentida 7-i digitaal doorstarten

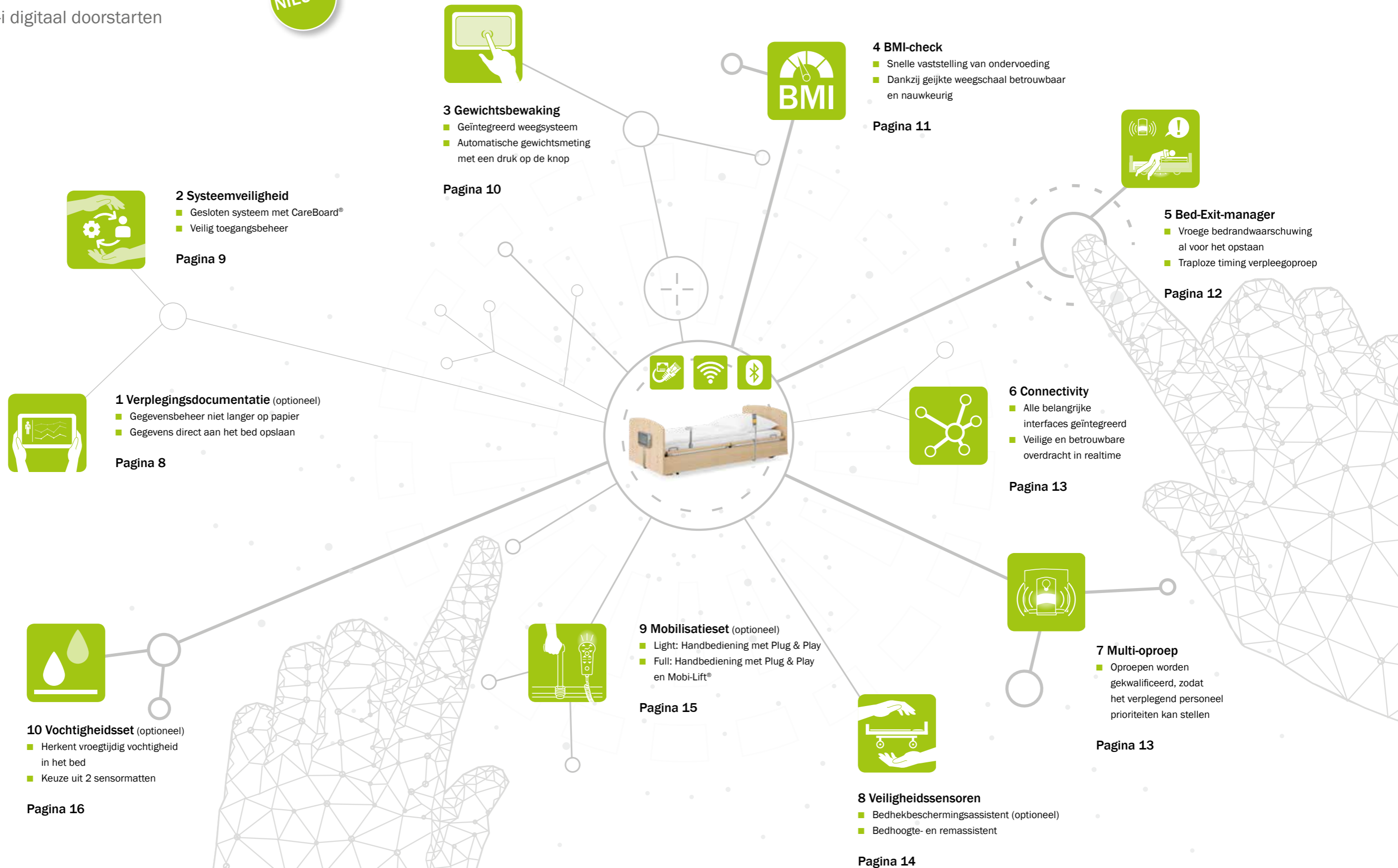

1 | Verplegingsdocumentatie live (optioneel)

Rechtstreekse invoer in plaats van schriftelijke notities

NIEUW!

De geavanceerde en eenvoudig te bedienen functies van de sentida 7-i zijn geïntegreerd in het CareBoard®. Dankzij het 7"-lcd-touchscreen is het gelukt om voor het verplegend personeel een veelheid aan functies in een overzichtelijk menu te rangschikken, zodat de dagelijkse zorg voor de gebruiker eenvoudiger is.



Video

- Eenvoudige en intuïtieve bediening dankzij een overzichtelijk menu
- energiespaarmodus: Automatische uitschakeling na ca. 10 minuten
- Hoge veiligheid: Login-menu's alleen voor het verplegend personeel. Eenvoudig uitloggen via de STOP-knop
- Display OFF via de Safety-GO-veiligheidsknop met automatische Logout na ong. 10 minuten



Gegevens hoeven niet langer handmatig op papier te worden beheerd. Bespaar per documentatiehandeling tot maximaal 5 minuten.

In het nieuwe menu **Verpleegroutine** kunnen snel en eenvoudig de belangrijkste vitale gegevens* zoals bloeddruk, hartslag en temperatuur worden opgeslagen. Bovendien kan het dagelijkse voedingsprotocol op een korte checklist worden ingevuld. Met **Save&Send** worden de gegevens rechtstreeks naar de server van de verpleegsoftware overgedragen.



Bespaar waardevolle verpleegtijd tot een totale waarde van **2** voltijd verpleegkrachten**

Met **"Save&Send"** eenvoudig opslaan en verzenden van de gewichts- en vitale gegevens van de bewoner*

2 | Systeemveiligheid

Gesloten systeem met toegangsmanager



Met sentida 7-i zet wissner-bosserhoff nieuwe normen op de gebieden veiligheid en verplegingsverlichting. Het systeem toont aan dat er ook oplossingen bestaan zonder virusgevoelige apps voor smartphone of tablet of onveilige toepassingen op internet of in de cloud. Het gaat hier om een **gesloten besturingssysteem met**

CareBoard®, wat inhoudt dat er geen bedreigingen bestaan door virussen of externe software of apps. De permanente kabelverbinding van het CareBoard® zorgt bovendien voor een continue veiligheid voor de gebruiker



wat betreft de wet op medische producten.

Nog meer veiligheid garandeert het **toegangsbeheer** met verschillende gebruikersrechten. Gevoelige bedinstellingen kunnen uitsluitend door bevoegde personen worden gebruikt. Het onbedoeld uitschakelen van belangrijke bewakingsfuncties is dus uitgesloten.



Video

* Alle bewonersgegevens worden niet-gepersonaliseerd opgeslagen en kunnen later in de verpleegsoftware aan de bewoner worden gekoppeld, onder naleving van de gegevensprivacy.
 ** Dankzij de tijdsbesparing tijdens het wegen (zie p. 10) en bij de verplegingsdocumentatie. Aannames: 100 bewoners, per jaar

3 | Gewichtsbewaking met touchscreen

Tijdsbesparing door wegen in bed

De in het bed geïntegreerde weegschaal ondersteunt het verplegend personeel zonder omslachtige inzet van tilapparatuur en rolstoelen, en zorgt zo voor een comfortabele en menswaardige gewichtsmeting ten behoeve van de documentatie. Bovendien is het mogelijk om het opgeslagen gewichtsverloop per week of maand weer te geven voor verbetering van de medische zorg en geeft het extra terugkoppeling over de dosering van medicijnen of voor het beoordelen van lymfoedeem in de benen. **Dankzij de nieuwe functie "Save&Send" zijn de gewichtsgegevens binnen korte tijd beschikbaar in de verpleegdocumentatie.**



Save&Send

NIEUW!



Video



Wegen met extra materiaal kost kracht, tijd en geld

- 2 verpleegkrachten en hulpmiddelen nodig
- Stress voor de bewoner
- Meerdere verplaatsingen



Voordelen van de geïntegreerde, geijkte weegschaal

- Gewichtswaerage en absolute gewichtsverandering
- Weegmoment direct in bed zonder verplaatsing
- Freeze-functie voor het verbergen van gewichtsinvoeden (bijv. accessoires)
- Export naar de verpleegdocumentatie via de Save&Send-functie
- Tijdsbesparing tot maximaal 15 minuten per weging

(Bron: eigen berekeningen)

Bespaar waardevolle verpleegtijd tot een totale waarde van **2** voltijd verpleegkrachten*

4 | BMI-check

Vroegtijdig vaststellen van ondervoeding al voor een artsbezoek

Wijzigingen in het eet- en drinkpatroon leiden op latere leeftijd vaak ongemerkt tot een ontoereikende energie-inname. Daardoor neemt het lichaamsgewicht af, soms leidend tot een ernstig ondergewicht (ouderdomsanorexia). Tegelijkertijd hebben de getroffen ook vaak een tekort aan voedingsstoffen, vitamines en mineralen.

Met de Body Mass Index (BMI) kan ondervoeding snel worden vastgesteld voor de behandelende arts. Bij de sentida 7-i kan de BMI direct in het Care Board worden beoordeeld. Het hier weergegeven systeem is gebaseerd op een geijkte weegschaal en daarom zeer nauwkeurig.

Overigens: In de vanaf november 2019 geldende Verplegings-TÜV is de bewaking van de voedings-toestand van uw bewoners een belangrijke indicator voor de kwaliteit van uw zorginstelling.



Video




Vroege herkenning van ondervoeding door dagelijkse BMI-check

- Dankzij de geïntegreerde bedweegschaal van de sentida 7-i hebt u op elk moment volledig inzicht in de BMI.
- Met behulp van BMI-classes kan ondervoeding snel worden vastgesteld door de behandelende arts (in de verpleging gewoonlijk een BMI < 19).
- De dagelijkse BMI-check geeft u een duidelijk beeld van de algemene toestand van de bewoner.
- De BMI-check is gebaseerd op een geijkte weegstelsel en daardoor zeer betrouwbaar en nauwkeurig.
- Voor de veiligheid van uw bewoners en de belangen van de familie.



Maak het verschil bij de TÜV** voor de verpleging

Body Mass Index

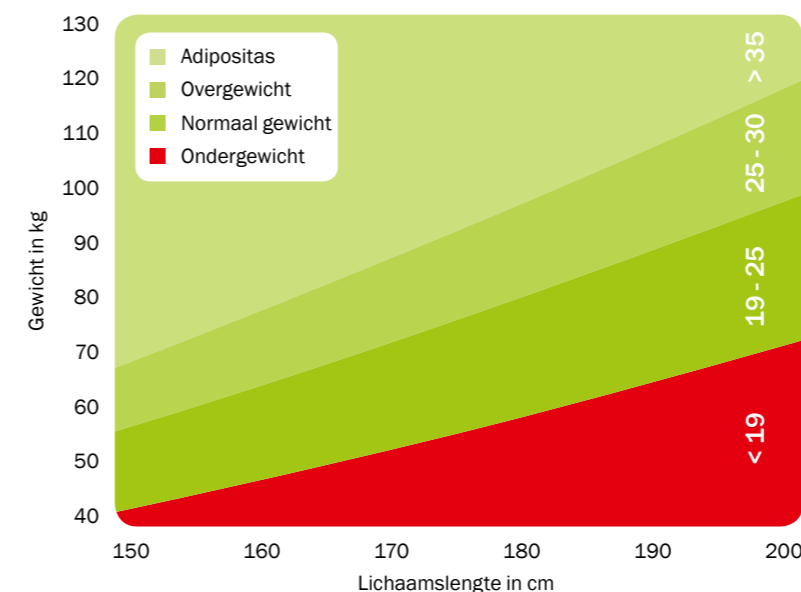

Rond **50%** van de instellingsbewoners ouder dan 65 jaar met een normaal gewicht lopen gevaar op ondervoeding! De BMI kan sluipend in het rode BMI-bereik afglijden!

Bron: BMI-check vanaf 65 jaar, jem - Journal voor voedingsgeneeskunde, 2006, p. 16

5 | Bed-Exit-manager

Vroegtijdig waarschuwingssysteem al voor het opstaan

wissner-bosserhoff is uw betrouwbare partner bij het voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM). wissner-bosserhoff biedt met de sentida 7-i een verpleegbed met intelligente sensoren dat dag en nacht op betrouwbare wijze ondersteunt bij de vermindering van VBM. Het is uitgerust met een automatisch nachtlucht dat tijdens het uitstappen uit bed wordt ingeschakeld en dooft wanneer de bewoner weer in bed ligt. De sentida 7-i is compatibel met bijna alle gangbare verpleegoproepsystemen op de markt.



Video

Overigens: In de vanaf november 2019 geldende TÜV voor de verpleging is valpreventie een belangrijke indicator voor de kwaliteit van uw verzorgingstehuis.



Bedrandoproep met vroege waarschuwingssensor - Best mogelijke valpreventie door het oproepsignaal voor het verlaten van het bed



Bed exit oproep - Voor snelle reactie bij het verlaten van het bed

Automatisch nachtlucht

- Nachtlucht wordt automatisch geactiveerd tijdens het uitstappen uit bed
- Nachtlucht dooft wanneer de bewoner weer in bed ligt



Individuele alarmering

- Flexibel instelbaar van 0 sec. directalarm tot 30 min.
- Aanpassing aan de mobiliteit van de bewoner
- Vroegtijdige alarmmodus voor hyperactieve bewoners. Verplegend personeel wordt al gealarmeerd als de bewoner uit bed dreigt te vallen.



Meer veiligheid – minder VBM*

- Snellere reactietijd bij vallen
- Hoger veiligheidsniveau bij nacht- en weekend-diensten
- Systematische doorvoering van bevindingen volgend uit het initiatief tegen fixatie: de ‚Werdenfelser method‘

6 | Connectivity

Gereed voor uw infrastructuur



Alle belangrijke interfaces zijn in het digitale verpleegbed sentida 7-i geïntegreerd, waarbij het bed voor de overdracht van bewonersgegevens gebruik maakt van bewezen standaardprotocollen uit de gezondheidszorg. Op die manier is een veilige en betrouwbare overdracht van de bewonersgegevens in nagenoeg realtime gegarandeerd, zodat het verplegend personeel tijd kan besparen en duidelijk wordt ontlast.



Standaard interfaces



Medische standaard radioprotocollen

7 | Multi-oproep

Gekwalificeerde oproepen voor de juiste prioriteiten



Ongeacht de Bed-Exit-bedrandoproep, de beddekbeschermings- of de vochtigheidsassistent zijn geactiveerd, via de multi-oproep kunnen oproepen worden gedifferentieerd en geprioriteerd. Hierdoor weet het verplegend personeel onmiddellijk welke bewoner het meest dringend hulp nodig heeft.



Video



- Vroege bedrandwaarschuwing al voor het opstaan
- Bed-Exit met bewonersspecifieke oproepvertraging
- Dag- en nachtmodus



- Free-Mode ter voorkoming van VBM
- Safe-Mode voor het beveiligen van een toegestane VBM tijdens de nacht
- Bedhoogte- en remassistent



- Bescherming tegen maceratie door vroegtijdige vochtdetectie in het bed
- Katoenen of kunststof mat (accessoires)
- Vergroting van de bewonerswaardigheid


8 | Veiligheidssensoren

Voor het welzijn van uw bewoners

Drie sensorassistenten garanderen een hoger veiligheidsniveau rondom het verpleegbed. Het geïntegreerde sensorsysteem geeft een signaal af zodra een geactiveerde assistent een onveilige situatie omtrent het bed registreert. Zo worden valincidenten voorkomen.





Video

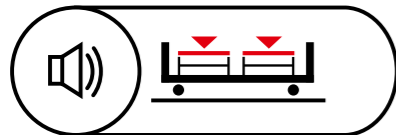

Safe



Free

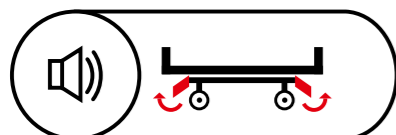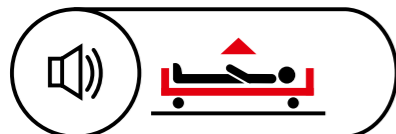

De bedhekassistent met twee modi: Free & Safe

Free: De nieuwe bedhekassistent geeft automatisch een melding als de beddekken per ongeluk omhoog zijn gezet. Zo kunnen niet toegestane vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) worden voorkomen. Zorgverleners die de 'Werdenfelser methode' volgen, worden zo effectief ondersteund.

Safe: In deze modus verhoogt de bedhekassistent bij zeer actieve bewoners de veiligheid en ondervangt een toegestane VBM. Een bewuste of onbewuste deactivatie van de beddekken wordt ook automatisch gemeld aan de verpleegkundige.

De bedhoogte-assistent waarschuwt het verplegend personeel als de opgeslagen bedhoogte wordt gewijzigd. Zo wordt ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld 's nachts de lage positie en overdag de best verrijdbare hoogte is ingesteld. Dit draagt significant bij aan de valpreventie.

De remassistent geeft een signaal af wanneer de rem na een verplegings- of reinigingsprocedure is ontgrendeld en niet opnieuw geactiveerd.

Bewakingsfasen



inactief



actief



oproep



In de verpleegmodus is het mogelijk om alle lichtwaarschuwingen te deactiveren. Zo wordt ongewenste activering van het licht tijdens het uitvoeren van de verpleegroutine vermeden. Na tien minuten wordt deze weer automatisch ingeschakeld.

9 | Mobi-Lift® (optioneel)

Voor zelfmobilisatie



Video



Mobi-Lift®:

- neerklapbaar
- ergonomisch
- stabiel



Immobilisatie-syndroom

Als iemand bedlegerig is, is hij in zijn bewegingsvrijheid beperkt. Als deze bewegingsbeperking niet wordt tegengegaan, ontstaat het zogenaamde immobiliteitssyndroom

RISICO'S:

- risico op trombose
- risico op decubitus
- verwardheid

Bron: Hulp in de verpleging: Lehrbuch für Gesundheits- und Krankpflegehilfe und Altenpflege, Thieme Verlag (Leerboek voor gezondheids- en ziekenzorg en ouderenverpleging)



Zelfmobilisatie met de Mobi-Lift®

- Dubbelzijdige geïntegreerde opstahulp
- Elektrische hoogtewerstelling
- Stimulering en behoud van de mobiliteit
- Werkdrukverlichting van het verplegend personeel

10 | Vochtigheidsassistent (optioneel)

Sensorische mat met oproepfunctie

Indien het bed vochtig is dan wordt een waarschuwing naar de in het huis aanwezige meldinstallatie gestuurd. De vochtigheidsassistent herkent vroegtijdig vochtigheid in het bed en draagt bij aan de bescherming van de bewoner. Verkrijgbaar zijn een katoenen sensorlaken, wasbaar bij 60 °C (O1) en een veegvaste kunststof sensormat (O2).



O1 Katoenen sensorlaken, tot 60 °C wasbaar



O2 Kunststof sensormat, veegvast

Rond
75%
van alle bewoners
van verpleeginstellingen
lijden aan incontinentie

In absolute zin
zijn dat ongeveer
300.000
bewoners

(Bron: www.bvmed.com van 01-03-2019)

**Incontinentie-
bescherming**

Een vochtigheidssensorlaken/-mat van wasbaar katoen of kunststof herkent vochtigheid in het bed en beschermt de bewoner tegen maceratie, met name bij incontinentie. Het systeem traint de continentie en verhoogt de waardigheid van de bewoner.

Bewonerscomfort en -veiligheid

SafeControl – verlichte designhandbediening



De designhandbediening SafeControl onderscheidt zich op het eerste gezicht door zijn overzichtelijkheid en de ergonomische vormgeving. De grote en verhoogde knoppen zijn overzichtelijk opgesteld en zijn daardoor gemakkelijk te bedienen, met name ook 's nachts, dankzij het **verlichte bedieningsveld**.

LED: blokkering van de bovenbeensteun/rugleuning

Links: Bovenbeensteun instellen

Rechts: Rugsteun instellen

Links: Hoogte instellen

Rechts: Autocontour instellen

LED: Blokkering van de hoogteverstelling

Safety-GO-veiligheidsknop

Led-lamp in- en uitschakelen

Uitgebreide functies

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening
- Achtergrondverlichting
- Geïntegreerde led-lamp
- Aparte beensteunverstelling
- Plug&Play voor het snel aansluiten van een bed (standaard)

Zorg op de intensive care en verpleging van ernstig zieken

Spiedverplegingspakket

Naast de voordelen van verpleging met sentida 7-i zijn de veiligheid en het voldoen aan de IEC 60601-2-52-norm van groot belang. Het verpleegbed biedt voorgeprogrammeerde nood- en therapieposities aan, die ook kunnen worden ingesteld als het lcd-touchscreen uitgevallen is.



De noodstopknop stopt onmiddellijk ongewenste bedbewegingen en koppelt het bed direct los van het lichtnet. De elektrische CPR-functie en Trendelenburg-positie kunnen automatisch met een druk op de knop worden ingesteld.

Het bed beschikt standaard over een accu. Alle noodgevalfuncties zijn ook bij een van het lichtnet losgekoppeld bed geactiveerd. De verpleging kan via een mechanische CPR de rugleuning eenvoudig met de hand laten zakken.



Safety-GO-
veiligheidstoets



Noodstop-
knop



Knop voor
automatische
Trendelenburg-
positie



Knop voor
elektrische
CPR-functie


Effectieve decubituspreventie

Ligvlak ergonomie | Dubbele retractie


De ergonomische verdeling van het ligvlak draagt bij tot vermindering van drukbelastingen en zo doende tot vermindering van doorligwonden. De maten van het in vier gedeeltes verdeelde ligvlak van de wissner-bosserhoff verpleegbedden zijn afgestemd op de inzichten van de antropometrie, d.w.z. naar de gemiddelde

lichaams grootte van een mens. Op basis van de inzichten van prof. Eigler wordt duidelijk dat het rugsteungedeelte voor een effectieve ondersteuning van de halswervelkolom minimaal 80 cm lang moet zijn. Een extra verlaging van de drukbelasting bereikt het BiNetic-ligvlak bij bovengemiddeld lange bewoners door de

geïntegreerde bedverlenging: met de gereedschapsloze express-bedverlenging kan het ligvlak tijdelijk, of met verlengingsinzetelement ook permanent, worden verlengd tot 220 cm, waarmee voorkomen wordt dat de voeten het voeteinde raken.

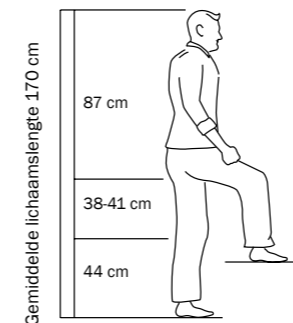


Antropometrie volgens Prof. Eigler*

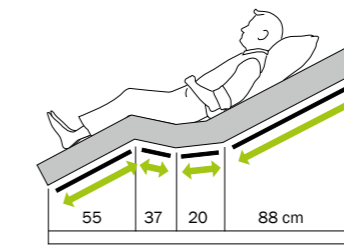

BiNetic-ligvlak 200 cm (lange rugleuning)


3
ligvlaks
pagina 30

WIBO-ligvlak met duidelijke belastingvermindering

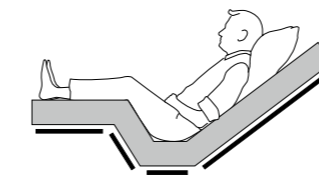

6 cm ← → 11 cm

Dubbele retractie = voorkoming van doorligwonden

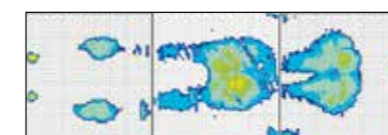


Thermografie van het BiNetic-ligvlak

Standaardligvlak zonder belastingvermindering



Enkelvoudige retractie = risico op doorligwonden

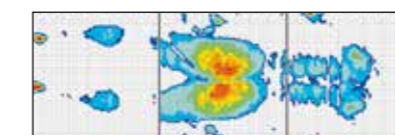

Thermografie van een standaardligvlak

Werking van de dubbele retractie aangetoond

wissner-bosserhoff volgt reeds vele jaren een bruikbaar concept voor het verminderen van risico's: de dubbele retractie als bestanddeel van het BiNetic-ligvlak. Bij de dubbele retractie wordt niet alleen de rugleuning, maar ook de beensteun van het zitgedeelte ingetrokken, zodat het oppervlak wordt vergroot. Intussen zijn ook de resultaten van de drukmetingen (thermografieën) bekend, waaruit duidelijk valt op te maken dat de drukbelasting bij dubbele retractie lager is dan bij de enkelvoudige retractie, en aanzienlijk lager is dan bij een standaardligvlak.

17cm
meer ruimte
in bed!

Bescherming en mobiliteit zonder VBM*

SafeFree® - het gepatenteerde bedhekkenconcept

Het gedeelde bedhekkensysteem SafeFree® is gepatenteerd, vrijwillig gecertificeerd en meer dan 1.000.000 keer in de praktijk getest. Het systeem is eenvoudig, snel en ruimtebesparend, kan in 2 seconden worden ingeklapt en kan apart worden ingesteld op 4 verschillende hoogtes, afhankelijk van de verpleegomstandigheden en lengte van de bewoner. Vrijheid behouden in plaats van vrijheid beperken, volledig in overeenstemming met de Werdenfelser-methode[†].

1 Geen bescherming nodig



In neergelaten toestand bieden de gedeelde bedhekken behalve een geriefelijke uitstraling ook vrije toegang tot de bewoner voor de dagelijkse verpleging. Storende accessoires, zoals middenstijlen of vast gemonteerde zijpanelen hoeven niet te worden verwijderd en opgeborgen.

2 Passieve bescherming (geen VBM*)



Voor de veiligheid 's nachts is het vaak voldoende om de lage positie van het bed te combineren met de eerste uittrekfase van het bedhek aan het hoofdeinde. Dit voorkomt overbodige barrières en zorgt toch voor een aanzienlijk lager risico op uit bed vallen. Bewoners behouden zo hun oriëntatie, zonder dat ze beperkt worden.

3 3/4-bescherming (geen VBM*)



Dit beschermingssysteem omvat een bewuste uitstapopening aan het voeteinde ter vermindering van de vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) en biedt tegelijkertijd een bijzonder hoog niveau van veiligheid.

4 Volledige bescherming (VBM*) voor matrassen tot 18 cm dik




De bovenste positie dient voor de uitgebreide bescherming van de bewoner. Beide delen van de bedhekken sluiten zo nauw op elkaar aan, dat ze net zo veilig zijn als een doorlopend bedhek. Zo doende voldoen de hekken aan de norm IEC 60601-2-52. Accessoires voor het sluiten van een middenopening bij fixatie met buik gordels zijn dus niet nodig.



De bedhekken kunnen met 6 cm worden verhoogd, zodat ook hogere matrassen goed passen.




Meer veiligheid door kleine midden opening** < 60 mm

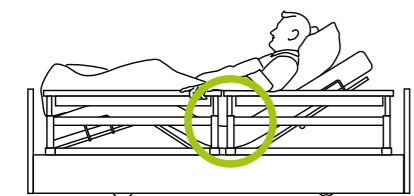

- Doelbewust overeenstemming met de norm IEC 60601-2-52
- Veiligheid in de verpleegpositie, d.w.z. ook met omhoog gebrachte rug- resp. beensteun
- Veiligheid zonder gebruik van een extra middenopenings-protector als accessoire bij fixatie met buikgordels conform de aanbeveling van BfArM^{††}

Verpleging met 4 gedeelde bedhekken = volledige toegang

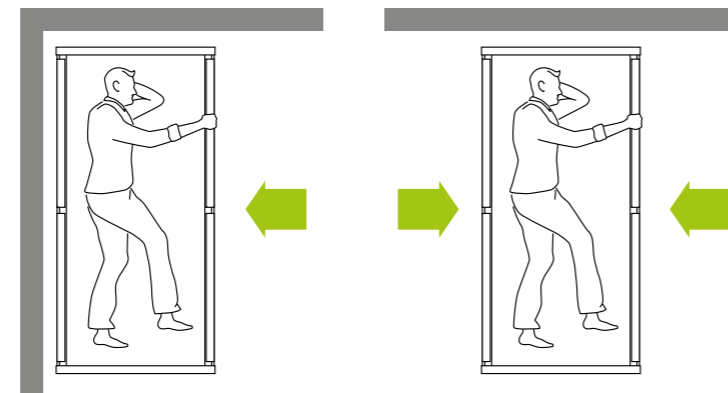

- Flexibel gebruik van het bed, zelfs in beperkte ruimte, voor standaardverpleging
- Flexibele toegang aan beide zijden bij meer behoefte aan verpleging
- Flexibel gebruik van het bed voor bewoners die links/rechts opstaan ten behoeve van de mobilisatie
- Vermijding van bijkomende kosten bij het achteraf aanbrengen van gedeelde bedhekken

Veilige mobilisatie ongeacht lichaamsgrootte



De gedeelde bedhekken kunnen zeer effectief worden gebruikt bij de mobilisatie, omdat ze goed kunnen worden beetgepakt en vastgehouden. Op deze manier fungeren ze als betrouwbare opstahulp en bevorderen zo de mobiliteit van de bewoner.

2 automatische posities



Probleemloos tv kijken, lezen of ontbijten in bed dankzij de automatische inrichting voor comfortabel zitten



Voorcoming van doorligwonden en vrijleggen van de hielen met behulp van de automatische lighouding

^{††} vergelijk 'Argumentationshilfen zu unterschiedlichen Bettgittervarianten' <http://werdenfelser-weg-original.de/medien/>
^{**} Vrijheidsbeperkende maatregelen | ^{**} Middenopening = afstand tussen de gedeelde bedhekken

^{††} Informatie van het BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel & Medizinprodukte, (Duits eederaal instituut voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) aan de beroepssectoren van 08-07-2004 erentienr. 913/0704)




Veilig verplegen, mobiliseren en slapen

3-traps-strategie

- Comfortabel verstelbereik in hoogte 27-80 cm
- Eerste tussenstop bij het uit bed stappen op stoelhoogte op 41 cm
- Stootbescherming bij instelling van de comfortzitpositie vanuit de lage positie en bij gebruik van een bedverlenging


80 cm

Optimale verpleegpositie

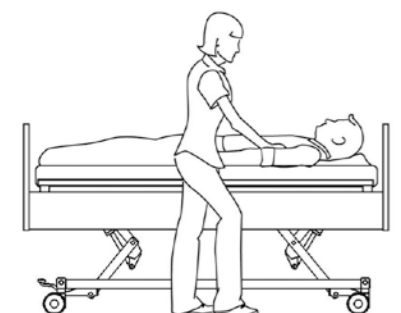

41 cm*

Veilige mobilisatie op stoelhoogte

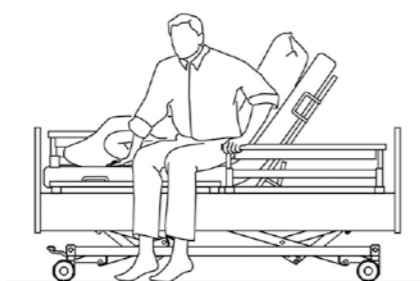

27 cm*

Voorkomen van vallen in de slaapfase




Flexibel en tijdsbeparing

3 bedlengtes zonder gereedschap instelbaar

- Alle verpleegbedden van wissner-bosserhoff beschikken standaard over een geïntegreerde bedverlenging.
- Flexibel en zonder gereedschap voor verschillende bedlengtes aangepast.
- Daarbij worden in elke configuratie de richtlijnen van de nieuwe norm IEC 60601-2-52 aangehouden.


200 cm

Bedlengte 200 cm:
De gedeelde beddekken bieden bescherming zonder middenopening > 318 mm* en zonder protector

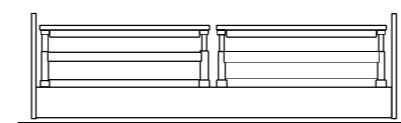


210 cm

Alternatieve bedlengte 210 cm:
Bescherming met langere beddekken aan het voeteinde zonder accessoires en zonder opening > 318 mm**

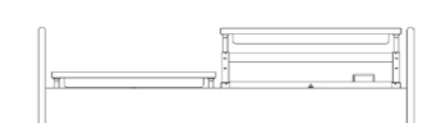

220 cm

Bedverlenging tot 220 cm:
is bij sentida met gedeelde beddekken tijdelijk instelbaar – volledige bescherming wordt door protector (accessoire) aan voeteinde gegarandeerd

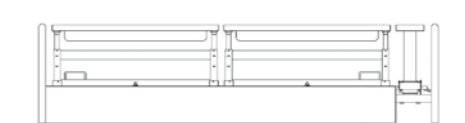




Woonconcept Forest

sentida 7-i | Design Df

Niets is zo ontspannen als een wandeling door het bos. De frisse lucht en de mooie groen- en bruintinten verfrissen, revitaliseren en maken ons hoofd leeg. Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen: Japanse onderzoekers hebben vastgesteld dat boswandelingen de bloeddruk en hartslag verlagen. Bovendien is het adrenalinegehalte lager dan na een stadswandeling. Dit concept is slechts een suggestie, graag geven we u persoonlijk advies.

Houtkleur
Cottage Pijnboomhout

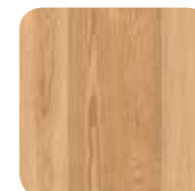

Kunstleder
zilvergrijs



Wandkleur



Decorkleuren



Keuze uit 2 modellen

Geriefelijk



Vrijdbaarheid
In elke bedhoogte

Castors
Vier 50 mm dubbelloopwielen
Compleet bedekt door huiselijk onderstel



Rembaarheid
Pedaalrem per as met centrale blokkeerrem op 2 wielen

Height adjustment
27-80 cm

Extra mobiel



Vrijdbaarheid
In elke bedhoogte

Wielen
Lichte loopwielen van 100, 125 of 150 mm of 125 mm dubbelloop- of designwielen



Rembaarheid
Rembeugel aan voeteind met centrale blokkeerrem op 4 wielen

Hoogteverstelling
27-80 cm met 100 mm lichte loopwielen
29,5-82,5 cm met 125 mm lichte loopwielen
28-81 cm met 125 mm dubbelloop- of designwielen
32-85 cm met 150 mm lichte loopwielen

CareBoard®

Keuze uit 2 posities



Muurmontage, kabelaansluiting aan het hoofdeind



Houder aan het voeteind, kabelaansluiting aan het voeteind

Design | Hoofd-/voeteinde

Hoofdeinde

Voeteinde

Vlak voeteinde



Design A
hoofd-/voeteinde



Design Ak
hoofd-/voeteinde



Design Ak
wegklapbaar



Design D



Design D



Design Dx



Design Df



Design Df



Design Dfx



Design G



Design G



Design Gx



Design K



Design K



Design Kx



Design O



Design O



Design Ox



Design T



Design T



Design Tx



Design Ts



Design Ts



Design Tsx

Kleuren | decors*



Vulkaanwit (U11502)



Berkenhout (R35018)



Lindberg-eiken (R20021)



Cottage pijnboomhout (R55023)



Pijnboomhout Suomi grijs (R55022)



Pijnboomhout Suomi bruin (R55021)



Kersen Havanna (R42006)



Acacia donker (R38006)




Beuken naturel (R24015)



Beuken (R24034)



Kersen (R42001)

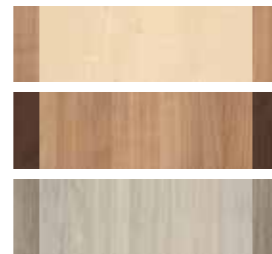

Kleurencombinatie memoriana

Gecertificeerde beveiliging

wissner-bosserhoff laat regelmatig haar productieprocessen en het management vrijwillig door TÜV Süd doorlichten. De onderneming is gecertificeerd volgens de bepalingen van de DIN EN ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement-systemen, van de DIN EN ISO 13485 voor de fabricage van medische hulpmiddelen evenals ISO 14001 voor milieubeheer.



ISO 9001:2015 ISO 13485:2012 + AC:2012 ISO 14001:2015 TÜV SÜD ISO 13485 CE Kwaliteitsborging voor geïntegreerd weegsystemen Certificaat voor ijking Beoordelingen ook bedekken

Kunstleder- en stofbekleding

Nieuwe combinatie-mogelijkheden
We adviseren u graag!



Met onze nieuwe bekleding van hoogwaardige materialen van bekende partners bieden we een uitstekend afwerkingsmateriaal met de volgende **eigenschappen**:

- Vocht- en vuilbestendig
- Luchtdoorlatend
- Waterafstotend

- Bloed- en urinebestendig
- Bestand tegen desinfectiemiddelen
- Extreem robuust
- Milieuvriendelijk en vrij van schadelijke stoffen
- Lange levensduur
- Moeilijk ontvlambaar (conform de ontstekings-criteria conform DIN EN 1021 deel 1 + 2 en BS 5852 Crib 5*)

Kunstleder



Zilvergrijs Parel Berken Kiezel Cashmere



Smoke Kersen Maïs Limoen Royal

Stoffen



Groen, bloemmotief (Aurora 6520) Blauw, gestreept (Agon 5520) Grijs, gestreept (Agon 8520) Grijs, gestippeld (Flint 8520) Weide (Mailo 6520) Zee (Mailo 5520) Zand (Mailo 1521) Steen (Mailo 8520) Rose (Mailo 4520)


Uitvoeringen en accessoires

Uitvoeringsopties

Basisversie
Weegschaal (incl. BMI-check), Bed-Exit, voorbereiding verplegingsdocumentatie

- Module 1** Verplegingsdocumentatie
- Module 2** Free & Safe
- Module 3** Vochtigheidset
- Module 4** Mobilisatieset


Dimensions

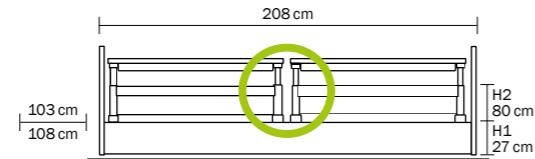

sentida 7 met gedeelde beddekken (serie 10), zonder opening
Externe afmetingen: L = 208 cm, B = 103/108 cm
Matrasmaat: L = 200 cm, B = 87 cm
H1 27 cm (lage positie), H2 80 cm (hoogste positie)

10-0697
sentida 7-i
De intelligente & geriefelijke
10-0698
sentida 7-i
De intelligente & de extra mobiele

Ligvlakken

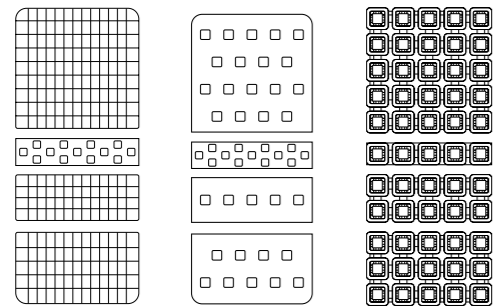


Standaard | Aero EasyClean Comfort

Modulair ligvlak


U heeft keuze uit drie verschillende ligvlakken:

- 01 Het roosterligvlak Aero (01) zorgt voor een goede ventilatie.
- 02 De kunststof steunvlakken van het EasyClean-ligvlak (02) zijn heel gemakkelijk te reinigen.
- 03 Het Comfort ligvlak (03) met zijn 55 veerelementen bevordert niet alleen het ligcomfort, maar biedt ook een waardevolle bijdrage ter voorkoming van doorligwonden. Over het algemeen zijn de ligvlakdelen eenvoudig te reinigen en verwijderbaar.

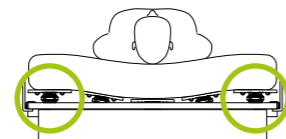


Comfortligvlak met 55 veerelementen


Bedverlengingen

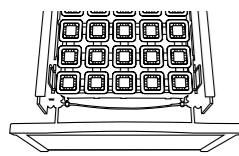

Bedverlenging met expressontgrendeling (standaard)

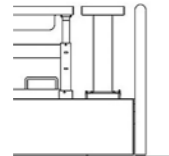


Permanente bedverlenging onrusthek serie 10 (optie)

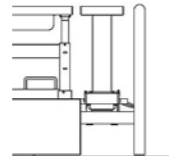

10-0580
Protector voor bedverlenging met 20 cm (optie)


Optionen

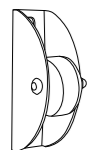


Verticale stootwielen




3D-stootwielen horizontale en verticale functie

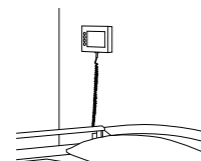

Kabelaansluiting aan het hoofdeinde met houder voor wandmontage

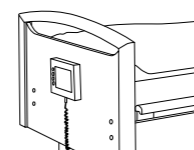


Kabelaansluiting aan het voeteinde met houder aan het voeteinde

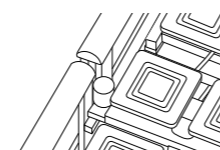


Aansluiting voor vochtsensormat

Accessoires

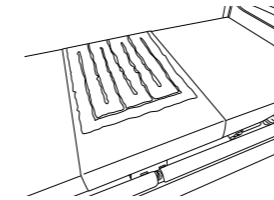


50-0583
Vochtsensormat van katoen, zonder kabel

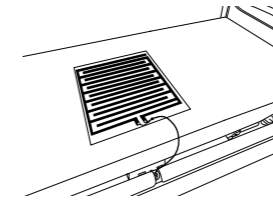


50-0624
Vochtsensormat van kunststof, incl. kabel



50-0623
Kabel voor vochtsensormat van katoen

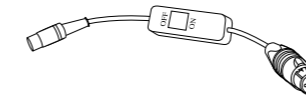


04-1508
Adapterkabel met aan-/uitschakelaar en bijpassende stekker voor het aansluiten op de meldinstallatie (klantspecifiek)

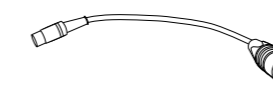


04-1608
Adapterkabel zonder aan-/uitschakelaar en bijpassende stekker voor het aansluiten op de meldinstallatie (klantspecifiek)



50-0681
Draadloze ontvanger alleen voor draadloze oplossing

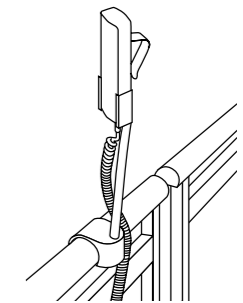


10-0419 en 10-0790
Altijd goed bereikbaar voor bewoners en personeel

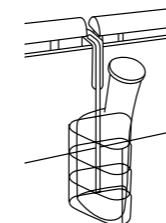


50-0165 Urinaalhouder

50-0164 Urinezakhouder (zonder afb.)

10-0424 Accessoire- en hand-schakelaarhouder voor het bevestigen aan het zijpaneel

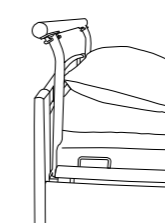


10-0534
Transportgreep EasyMove

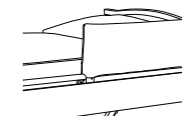


50-0174
Gestoffeerde bescherming voor gedeelde beddekken serie 10




50-0206
Valmat B 90 x L 200 cm, hoogte ca. 4,5 cm

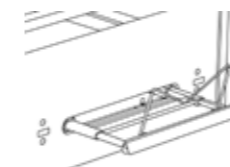


10-0617
Geïntegreerd design-beddengoedrek Compatibel met alle bedden (uitgezonderd de 09-serie 3-voudige beddekken en Design A-kk)

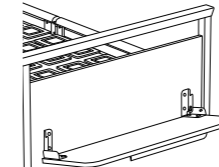

10-0719
Beddengoedplank, compatibel met alle bedden

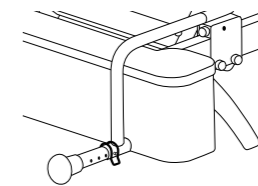

Wandafstandhouder aan het hoofdeinde, telescopisch, alleen voor sentida 5 en 6
10-0801 kort, 1 x 20 mm
10-0802 middel, 4 x 20 mm
10-0803 lang, 8 x 20 mm
Wandafstandhouder aan het hoofdeinde, alleen voor sentida 5 en 6 (niet afgebeeld)
10-0707 kort | **10-0709** lang

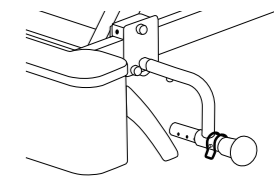

Zijdelingse wandafstandhouder, telescopisch, alleen voor 5 en 6
10-0804 kort, 1 x 20 mm
10-0805 middel, 4 x 20 mm
10-0806 lang, 8 x 20 mm
Zijdelingse wandafstandhouder, alleen voor sentida 5 en 6 (niet afgebeeld)
10-0708 kort | **10-0710** lang



Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Belgium bvba/sprl

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen
Tel. +32 15210841 | Fax +32 15291464
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Keerweer 42 | 3316 KA Dordrecht
Tel. +31 78 6521850 | Tel. +31 78 6521855
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl

