

■ ■ wissner-
■ ■ bossert-hoff

L'élégance fonctionnelle au service des soins



sentida 1-p | 4-p

Lits psychiatriques




Sécurité maximale et confort réunis

sentida – lits psychiatriques

Les troubles et les maladies mentales et psychosomatiques engendrent des coûts élevés dans le système de santé, avec une nette tendance à la hausse. Dans bien des cas, il est difficile de trouver la cause directe des troubles mentaux et d'autres maladies. Outre les facteurs biologiques (tels que les facteurs génétiques ou les troubles du métabolisme) et une prédisposition familiale, les changements structurels dans le monde du travail, le stress dans l'environnement social, les influences environnementales et les changements démographiques comptent parmi les facteurs essentiels de l'augmentation dans le monde entier de maladies telles que la dépression, la schizophrénie, la psychose et les maladies neurodégénératives, aux âges différents et dans différentes phases de la vie.

Les concepts de prise en charge et de traitement stationnaires et ambulatoires dans les services et établissements spécialisés pour les maladies psychiatriques imposent des exigences particulières aux dispositifs médicaux. Disponibles dès maintenant, sentida 1-p et sentida 4-p sont deux lits psychiatriques conçus pour répondre de façon optimale à ces besoins spécifiques. Le risque d'automutilation ou de tentative de suicide est ainsi nettement réduit par différents composants fonctionnels, tels qu'un sommier non amovible, des porte-courroies de fixation intégrés et des boîtes intégrées verrouillables pour la télécommande et le cordon d'alimentation. Outre la prise en compte des aspects de sécurité nécessaires dans les situations de crise psychologique extrêmes, la conception attrayante et conviviale facilite et encourage le processus d'adaptation du résident/patient.

En tant que lits de soins spécialisés, sentida 1-p et sentida 4-p sont également équipés des fonctions caractéristiques d'un lit de soins bas¹⁾, dont, entre autres, des barrières latérales[®] divisées ainsi qu'une position basse qui garantit également une prévention des chutes pendant les phases de repos et de sommeil.

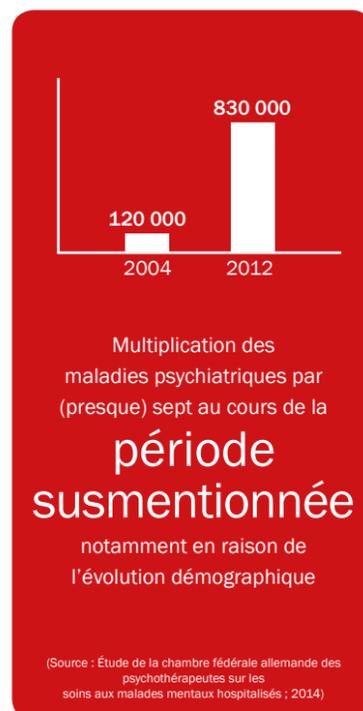

Les avantages des lits psychiatriques sentida 1-p et 4-p

Résident/patient

- Sécurité maximale et confort réunis

Personnel soignant

- Soutien avec des concepts de soins et de traitements adaptés aux besoins

Gestion

- Utilisables dans les soins aigus, de courte durée et de longue durée (sécurité d'investissement)

sentida 1-p | 4-p

Vitrine



sentida 1-p
pour une stabilité optimale

Article 10-0870

- Gériatrie, gérontopsychiatrie
- En position basse
- Pieds extra larges à la tête et au pied du lit
- Frein électrique télécommandé
- 225 kg
- 25 – 80 cm (Option : sans arrêt intermédiaire automatique)
- Dimensions 208 x 106 cm
- Panneau de tête bas + panneau de pieds bas, Accessoires : EasyMove 10-0534
- Panneau de tête haut + panneau de pieds bas
- Panneaux de tête et de pieds en HPL
- En option, parois latérales HPL ou mélamine
- Télécommande à 7 touches pour les soignants avec toutes les fonctionnalités, y compris l'activation des rôles
- Télécommande à 5 touches pour le résident/patient pour le réglage du relève-buste ou du relève-jambes



• Autres décors sur demande



sentida 4-p
pour plus de mobilité

Article 10-0875

- Psychiatrie clinique
- Quelle que soit la hauteur du plan de couchage
- À la tête et au pied du lit 50 ou 75 mm Roues doubles
- Étriers de freinage à la tête et au pied du lit
- 225 kg
- 25 – 80 cm (Option : sans arrêt intermédiaire automatique)
- Dimensions 208 x 106 cm
- Panneau de tête haut + panneau de pieds bas
- Panneau de tête bas + panneau de pieds bas
- Panneaux de tête et de pieds en HPL
- Parois latérales en HPL
- Télécommande à 7 touches pour les soignants avec toutes les fonctionnalités
- Télécommande à 5 touches pour le résident/patient pour le réglage du relève-buste ou du relève-jambes



• Autres décors sur demande

Domaine d'utilisation
Manœuvrabilité
Roues
Système de freinage
Charge nominale de fonctionnement en sécurité
Réglage de la hauteur
Dimensions
Variantes de panneaux de tête/de pieds
Matériaux
Concept d'utilisation

Décor

¹⁾Vous trouverez d'autres informations concernant nos lits de soins bas dans notre prospectus « sentida1-6 ».

sentida 1-p | 4-p

Pour les exigences particulières en psychiatrie



01 Plan de couchage métallique fixe



02 Verrouillables individuellement



03 Concept de télécommande personnalisé

- Boîtier de télécommande verrouillable pour la télécommande des soignants (toutes les fonctionnalités)
- Télécommande de résident/patient en option (sans illustration) avec fonctionnalité réduite par Plug & Play au-dessous du sommier




04 Autonomie assurée par batterie rechargeable (en option)



sentida 1-p

(Illustration avec EasyMove, art. 10-0534)

sentida 4-p

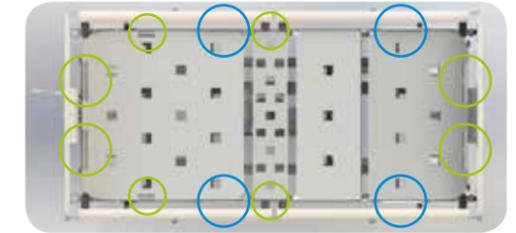

05 Porte-courroies de fixation intégrés (○) et évidements supplémentaires pour d'autres supports de fixation (○)



06 Boîtier de cordon d'alimentation verrouillable dans le panneau de tête



07 Amortisseur en caoutchouc sous le relève-buste (en option)



08 Passages de câbles à l'intérieur ; Liaison équipotentielle sur le sommier (en option)




sentida 1-p | 4-p

Les avantages du produit



Sécurité

- Les barrières latérales SafeFree® et le concept de télécommande s'adaptent aux besoins individuels de chaque client dans les soins hospitaliers aigus, de courte durée et de longue durée.
- Le plan de couchage métallique fixe, le cheminement caché des câbles et les porte-courroies de fixation intégrés sont une aide précieuse dans des situations psychologiques exceptionnelles et assurent une sécurité maximale lors d'interventions de crise.

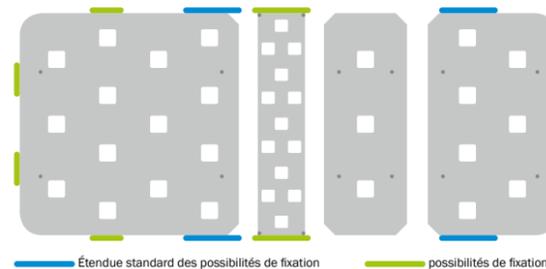

Étendue standard des possibilités de fixation possibilités de fixation



Optimisation du processus

- La fonctionnalité, le design et le choix des matériaux permettent une utilisation dans les soins aigus, de courte durée et de longue durée de personnes atteintes de maladies mentales, en maison de soins comme à l'hôpital.



Optimisation des processus

- Concept de positionnement à trois niveaux – position de lit bas, de mobilisation et de soins – favorise l'autonomie du résident/patient et favorise les processus d'autonomisation.

80 cm
Position optimale pour les soins



40 cm
Mobilisation en toute sécurité à hauteur de chaise



25 cm
Prévention des chutes pendant la phase de sommeil



Hygiène

- Les surfaces faciles à nettoyer facilitent la mise en œuvre des concepts d'hygiène.
- Les surfaces résistantes aux rayures et aux chocs conviennent à une multitude d'applications de soins au quotidien.



wissner-bosserhoff soumet volontairement et régulièrement ses procédés de fabrication et son management au contrôle de l'organisme allemand de contrôle et de certification TÜV. L'entreprise est ainsi certifiée conforme à la norme DIN EN ISO 9001:2008 pour les systèmes de gestion qualité et à la norme DIN EN ISO 13485:2003+AC:2007 pour la fabrication de dispositifs médicaux.

Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen

Tel.: +32 (0)15 21 08 41 | Fax: +32 (0)15 29 14 64

E-mail: info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

