

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff



sentida

Universele, lage verpleegbedden





De perfecte vorm van veiligheid en welzijn

sentida – universele, lage verpleegbedden

Valincidenten behoren tot de grootste gevaren voor de lichamelijke gezondheid én het psychische welzijn van oudere mensen. Systematische valpreventie speelt daarom in de ouderenverpleging een doorslaggevende rol en is een belangrijk kwaliteitskenmerk voor verpleeghuizen. De consequenties voor de gezondheid die het gevolg zijn van vallen, zijn juist bij oudere mensen vaak ernstig en in het ergste geval onomkeerbaar.

De angst voor opnieuw vallen is een van de meest voorkomende psychische gevolgen die kan leiden tot beperkte lichamelijke activiteit, een verlies aan zelfvertrouwen en tot sociale isolatie. Met de lage verpleegbedden uit de sentida-lijn is wissner-bosserhoff erin geslaagd om de eisen van de moderne verpleging consequent en met name compromisloos om te zetten: optimale veiligheid in combinatie met een geriefelijk design.

Innovatieve oplossingen, zoals de unieke 3-traps-strategie en het gepatenteerde SafeFree®-beddekkoncept, verkleinen de kans op vallen en de gevolgen ervan en stellen maatstaven wat betreft veiligheid, mobiliteit, hoogteverstelbaarheid en geriefelijkheid.

5

**miljoen valincidenten
van oudere
mensen per jaar:**

Bijna een derde van de 65-plussers en ouderen, en de helft van de 80-plussers en ouderen valt jaarlijks minimaal eenmaal. Alleen al in Duitsland komt het per jaar tot rond 5 miljoen valincidenten bij oudere mensen.

(Bron: Gesundheit und Krankheit im Alter. (gezondheid en ziekte op hoge leeftijd)
Uitgeverij: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/
Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/
Thomas Ziese, Robert Koch-Institut, Berlin 2009)



**preventie met
sentida
lage verpleegbedden**


Voor het gebruik in inrichtingen die hoge eisen stellen aan universele en basisverpleging: verpleeghuizen, zorghotels, palliatieve afdelingen, afdelingen voor dementie en geriatrie en revalidatieinstellingen.



Woonconcept Feathers

sentida | Design 010 | Decor Acacia donker

De natuur als voorbeeld bij de selectie van materialen en kleuren. Harmonisch op elkaar afgestemd als de veren van een vogel – zo ontstond een behaaglijk ingerichte kamer, die de bewoner geborgenheid en bescherming biedt. Aan het raam luister je 's morgens naar het vogelgekwetter. Dit concept is slechts een suggestie, graag geven we u persoonlijk advies.

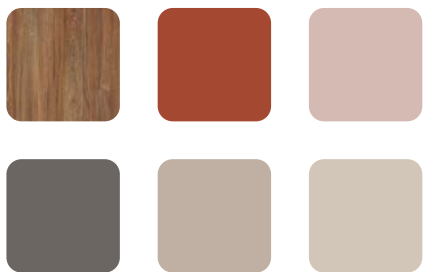

Het sentida-portfolio

Het instapmodel



De mobiele



Model

sentida 1

sentida 3

Verrijdbaarheid

In de lage positie

In elke bedhoogte

Wielen

Vier dubbele loopwielen van 50 mm

Bij het voeteinde vier dubbele loopwielen van 50 of 75 mm, bij het hoofdeinde twee bokwielen van 100 of 160 mm

Rembaarheid

Elektrische rem met de handbediening

Elektrische rem met de handbediening, rembeugel bij het voeteinde

Veilige werklust

225 kg

225 kg

Hoogteverstelling

25-80 cm

25-80 cm

Ligvlak

87/100 x 200/210/220 cm

87/100 x 200/210/220 cm

De flexibele



sentida 4

In elke bedhoogte

Dubbele loopwielen van 50 of 75 mm

Rembeugel bij het hoofd- en het voeteinde

225 kg

25-80 cm

87/100 x 200/210/220 cm

De geriefelijke



sentida 5

In elke bedhoogte

Dubbele loopwielen van 50 mm volledig bekleed door geriefelijke chassis

Pedaalrem per as met centrale rem op twee wielen



27-80 cm

87/100 x 200/210/220 cm

De extra mobiele



sentida 6

In elke bedhoogte

Lichte loopwielen van 100, 125 of 150 mm of dubbele loopwielen resp. designwielen van 125 mm

Rembeugel aan voeteinde met centrale blokkeerrem op vier wielen



27-80 cm met 100 mm lichte loopwielen
29,5-82,5 cm met 125 mm lichte loopwielen
28-81 cm met 125 mm dubbele loopwielen resp. designwielen
32-85 cm met 150 mm lichte loopwielen

87/100 x 200/210/220 cm (sentida 6 & 6-d*)
79 cm x 200 cm (sentida 6-s)
79 cm x 190 cm (sentida 6-xs)





meer dan
1.000.000 x
in de praktijk getest

Alle voordelen in één oogopslag

Bescherming en mobiliteit zonder VBM*

SafeFree® - het gepatenteerde bedhekkensconcept | 12 - 13

NIEUW: Bedhekkbescherming afgestemd op uw behoeften | SafeFree® Flex

| 14 - 15

Veilig verplegen, mobiliseren en slapen

3-traps-strategie | 16

Flexibiliteit en tijdbesparing

3 bedlengtes zonder gereedschap instelbaar | 17

Effectieve voorkoming van doorligwonden

Ligvlakergonomie en modulariteit | 18 - 19

NIEUW: Mobiliteit verbeteren en behouden

SafeLift | Revolutionaire bedbediening voor de bewoner | 20

Intuïtieve bediening

Overzichtelijk en ergonomisch | 21

Dag en nacht veilig

SafeSense® - de intelligente Bed-Exit-Sensoren | 22

De demontabele

sentida 6-d | 23

Energie-efficiëntie en belastbaarheid

Innovatief aandrijvingssysteem | 26

Verlichting

soluna & lymera | 27

NIEUW: Handmatige mobilisatiehulp

MobiStick 2 | 28

Wij denken vooruit

memoriana | Ruimteconcept voor mensen met dementie | 29

Overige mogelijkheden

Design | Kleuren en decors | Opties en accessoires | 30





Woonconcept **Urban**

sentida | Design HD-3 | Decor Kersen Havanna | Stof Steen | Knoopjesstiksel

Men is weer op zoek naar de ruimtes in de stad die verbonden zijn met stedelijkheid als levensstijl, die diversiteit en vrijheid vertegenwoordigen, waar iedereen elkaar kan ontmoeten - een stad die het waard is om in te wonen omdat ze van iedereen is en iedereen toegang heeft tot haar openbare ruimtes. Dit concept is slechts een suggestie, wij adviseren u graag individueel.



Bescherming en mobiliteit zonder VBM**

SafeFree® – het gepatenteerde bedhekkenconcept

Het gedeelde bedhekkensysteem SafeFree® is gepatenteerd, vrijwillig gecertificeerd en meer dan 1.000.000 keer in de praktijk getest. Het systeem is eenvoudig, snel en ruimtebesparend, kan in 2 seconden worden ingeklapt en kan apart worden ingesteld op 4 verschillende hoogtes, afhankelijk van de verpleegomstandigheden en lengte van de bewoner. Vrijheid behouden in plaats van vrijheid beperken, volledig in overeenstemming met de Werdenfelser-methode*.

1

Geen bescherming nodig



In neergelaten toestand bieden de gedeelde bedhekken behalve een geriefelijke uitstraling ook vrije toegang tot de bewoner voor de dagelijkse verpleging. Storende accessoires, zoals middenstijlen of vast gemonteerde zijpanelen hoeven niet te worden verwijderd en opgeborgen.

2

Passieve bescherming

(geen VBM**)



Voor de veiligheid 's nachts is het vaak voldoende om de lage positie van het bed te combineren met de eerste uittrekfase van het bedhek aan het hoofdeinde. Dit voorkomt overbodige barrières en zorgt toch voor een aanzienlijk lager risico op uit bed vallen. Bewoners behouden zo hun oriëntatie, zonder dat ze beperkt worden.


3

3/4-bescherming (geen VBM**)




Dit beschermingssysteem omvat een bewuste uitstapopening aan het voeteinde ter vermindering van de vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) en biedt tegelijkertijd een bijzonder hoog niveau van veiligheid.

Meer veiligheid door kleine midden-opening*** < 60 mm

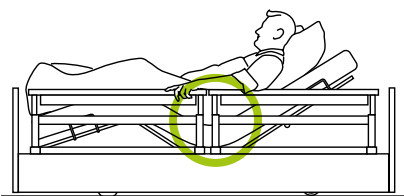

- Doelbewust overeenstemming met de norm IEC 60601-2-52
- Veiligheid in de verpleegpositie, d.w.z. ook met omhoog gebrachte rug- resp. beensteun
- Veiligheid zonder gebruik van een extra middenopenings-protector als accessoire bij fixatie met buik gordels conform de aanbeveling van BfArM****

Verpleging met 4 gedeelde bedhekken = volledige toegang

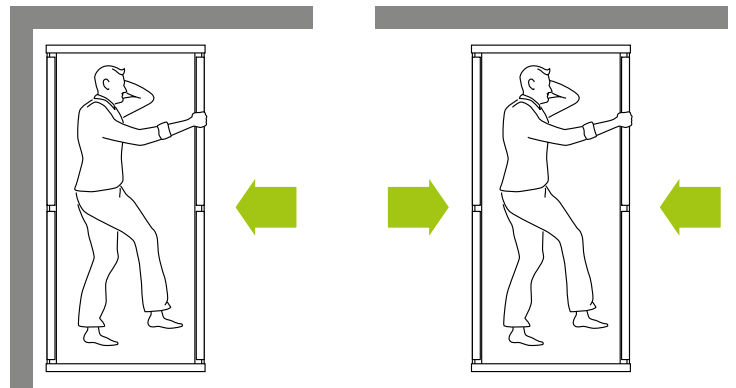

- Flexibel gebruik van het bed, zelfs in beperkte ruimte, voor standaardverpleging
- Flexibele toegang aan beide zijden bij meer behoefte aan verpleging
- Flexibel gebruik van het bed voor bewoners die links/rechts opstaan ten behoeve van de mobilisatie
- Vermijding van bijkomende kosten bij het achteraf aanbrengen van gedeelde bedhekken

4

Volledige bescherming (VBM**)

voor matrassen tot 18 cm dik



De bovenste positie dient voor de uitgebreide bescherming van de bewoner. Beide delen van de beddekken sluiten zo nauw op elkaar aan, dat ze net zo veilig zijn als een doorlopend beddek. Zo doende voldoen de dekken aan de norm IEC 60601-2-52. Accessoires voor het sluiten van een middenopening bij fixatie met buik gordels zijn dus niet nodig.

De beddekken kunnen met 6 cm worden verhoogd, zodat ook hogere matrassen goed passen.



Meer informatie:



Video's over het beddekken-concept



Veilige mobilisatie ongeacht lichaamsgrootte

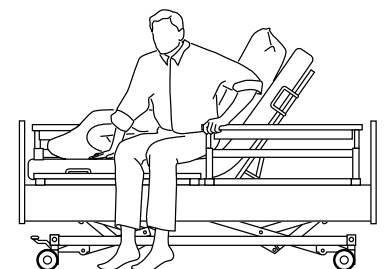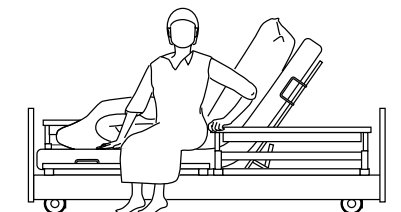

De gedeelde beddekken kunnen zeer effectief worden gebruikt bij de mobilisatie, omdat ze goed kunnen worden beetgepakt en vastgehouden. Op deze manier fungeren ze als een betrouwbare opstahulp en bevorderen zo de mobiliteit van de bewoner.

2 automatische posities



Probleemloos tv kijken, lezen of ontbijten in bed dankzij de automatische instelling voor comfortabel zitten



Voorkoming van doorligwonden en vrijleggen van de hielen met behulp van de automatische lighouding

SafeFree® Flex

Bedhekbescherming afgestemd op uw behoeften

Naast vast gemonteerde zijpanelen biedt SafeFree® Flex zo veel mogelijk vrijheid en zo veel bescherming als nodig is, afgestemd op de individuele behoeften en gericht op de toekomst. Daarbij behoudt SafeFree® Flex het huiselijk designkarakter, dat kenmerkend is voor alle verpleegbedden van wissner-bosserhoff.

0

Geen bescherming nodig



Comfortbed
zonder bedhekbescherming

Safe

Volledige bescherming



Een veilige bevestiging van de elementen

Vorkomt onbedoeld losmaken of verwijderen van de zijelementen

Volledige veiligheid



Openingsafsluiting tussen zijelement en ligvlak

Bescherming tegen incidenten als gevolg van vastgrijpen of beklemd raken

Maximale mobilisatie



Optimale lengte en individueel instelbare hoogte van de bedhekbescherming aan het hoofdeinde

Perfekte bescherming tijdens het slapen en comfortabele en ergonomische mobilisatie van de bewoner



1|2

Passieve bescherming (geen VBM*)



Mobilisatiehulp
uitsluitend elementen aan hoofdeinde

3

3/4-bescherming (geen VBM*)



Wandbescherming
met uitstap aan voeteinde

4

Volledige bescherming (VBM*) voor matrassen tot 18 cm dik



4 volledig verstelbare
bedhekbeschermingen

Free

Minder VBM*



Bewust 'weglaten'
van bedhekbescherming

Investeringszekerheid
voor de exploitant

Flex

Efficiënter

Zijelementen aan te passen zonder gereedschap

Niet alleen het inzetten van de zijelementen is flexibel, ook uw budget wordt flexibel benut: u betaalt slechts voor de elementen die uw bewoners ook daadwerkelijk nodig hebben.

Geen monteur nodig


Snelle omwisseling bij een gewijzigde bewonerssituatie – met openingsafdichting zonder (1) en met leuning (2) of volledig verstelbare bedhekbescherming (3)



1



2

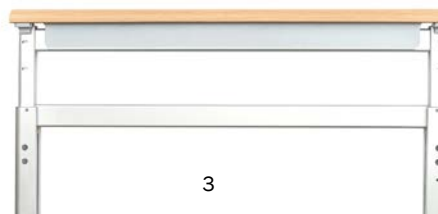

3

Profiteer van een huiselijk design met een doorlopend zijelement, ongedacht de benodigde mate van mobilisering of bescherming van de bewoner.



Video




Veilig verplegen, mobiliseren en slapen

3-traps-strategie

- Comfortabel verstelbereik in hoogte 27-80 cm
- Eerste tussenstop bij het uit bed stappen op stoelhoogte op 41 cm
- Stootbescherming bij instelling van de comfortzitpositie vanuit de lage positie en bij gebruik van een bedverlenging


80 cm

Optimale verpleegpositie

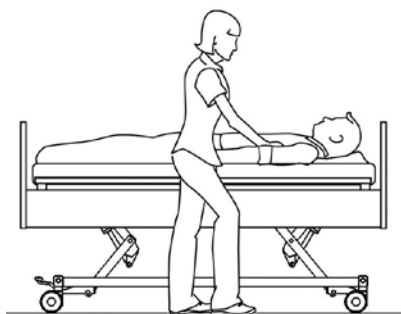

41 cm*

Veilige mobilisatie op stoelhoogte

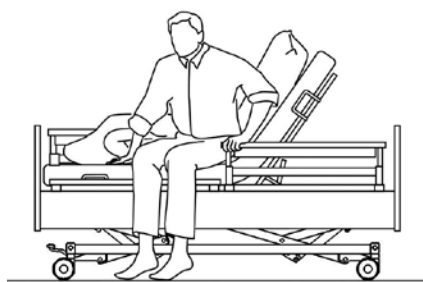

27 cm*

Voorkomen van vallen in de slaapfase





Flexibel en tijdbesparend


3 bedlengtes zonder gereedschap instelbaar

- Alle verpleegbedden van wissner-bosserhoff beschikken standaard over een geïntegreerde bedverlenging.
- Flexibel en zonder gereedschap voor verschillende bedlengtes aangepast.
- Daarbij worden in elke configuratie de richtlijnen van de nieuwe norm IEC 60601-2-52 aangehouden.

200 cm

Bedlengte 200 cm:


De gedeelde beddekken bieden bescherming zonder middenopening > 318 mm* en zonder protector

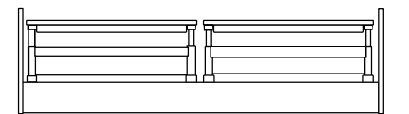

210 cm

Alternatieve bedlengte 210 cm:


Bescherming met langere beddekken aan het voeteinde zonder accessoires en zonder opening > 318 mm**

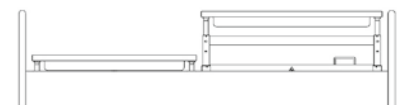

220 cm

Bedverlenging tot 220 cm:

is bij sentida met gedeelde beddekken tijdelijk instelbaar – volledige bescherming wordt door protector (accessoire) aan voeteinde gegarandeerd

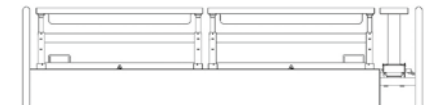


Effectief voorkomen van doorligwonden

3 ligvlakken naar keuze | Modulair ligvlak


De ergonomische verdeling van het ligvlak draagt bij tot het vermijden van drukbelastingen en zo doende tot de vermindering van doorligwonden. De maten van het in vieren gedeelde ligvlak van de wissner-bosserhoff verpleegbedden zijn afgestemd op de inzichten van de antropometrie, d.w.z. naar de gemiddelde lichaamsgrootte

van een mens. Op basis van de inzichten van prof. Eigler wordt duidelijk dat het rugsteungedeelte voor een effectieve ondersteuning van de halswervelkolom minimaal 80 cm lang moet zijn. Bij bovengemiddeld lange bewoners biedt het BiNetic-ligvlak extra verlaging van de drukbelasting door de geïntegreerde bedverlenging:

met de gereedschapsloze express-bedverlenging kan het ligvlak tijdelijk - of met verlengingsinzetelement ook permanent - worden verlengd tot 220 cm, waarmee voorkomen wordt dat de voeten het voeteinde raken.

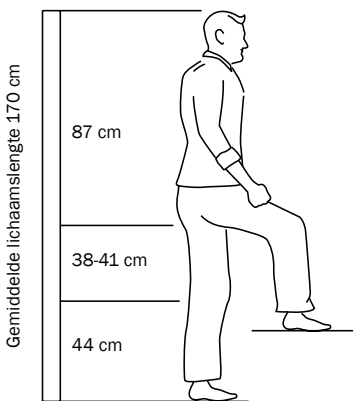

Antropometrie volgens Prof. Eigler*

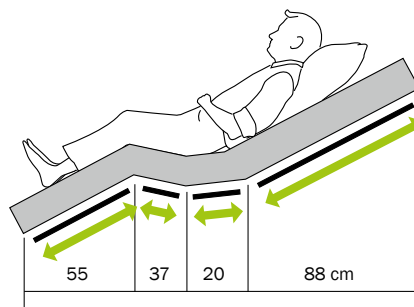

BiNetic-ligvlak 200 cm (lange rugleuning)

Tot wel

2,7

miljoen mensen

in Duitsland leiden aan chronische wonden, zoals doorligwonden. Met name vanwege demografische veranderingen zijn het vooral ouderen die last hebben van chronische wonden. Bij ouderen van 90 jaar of ouder ligt het risico hierop rond de 11%. Doorligwonden zijn bijzonder ingrijpend voor bewoners. Therapie neemt meestal meerdere weken of maanden in beslag en kan bovendien aanvullende klachten veroorzaken.

Bron: Onderzoek BVMed 2012

Werking van de dubbele retractie aangetoond**

wissner-bosserhoff volgt reeds vele jaren een bruikbaar concept voor het verminderen van risico's: de dubbele retractie als bestanddeel van het BiNetic-ligvlak. Bij de dubbele retractie wordt niet alleen de rugleuning, maar ook de beensteun van het zitgedeelte ingetrokken, zodat het oppervlak wordt vergroot.


Intussen zijn ook de resultaten van de drukmetingen (thermografieën) bekend, waaruit duidelijk valt op te maken dat de drukbelasting bij dubbele retractie lager is dan bij de eenvoudige retractie, en aanzienlijk lager is dan bij een standaard ligvlak.

Modulair ligvlak


U heeft de keuze uit drie verschillende ligvlakken:

- Het roosterligvlak Aero (01) zorgt voor een goede ventilatie.
- De kunststof steunvlakken van het Easyclean-ligvlak (02) zijn heel eenvoudig te reinigen.
- Het comfort ligvlak (03) met 55 veerelementen bevordert niet alleen het ligcomfort, maar biedt ook een waardevolle bijdrage ter voorkoming van doorligwonden.


Over het algemeen zijn de ligvlakdelen eenvoudig te reinigen en verwijderbaar.

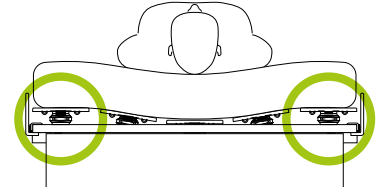

Comfortligvlak met 55 veerelementen

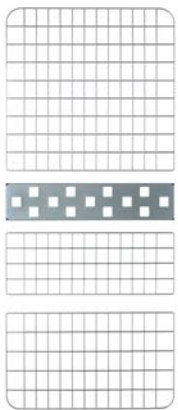

01

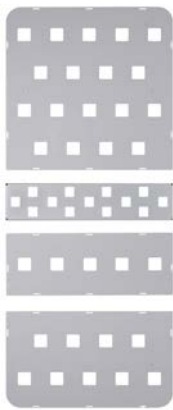

02




03




Details comfort ligvlak

WIBO-ligvlak met duidelijke
belastingvermindering

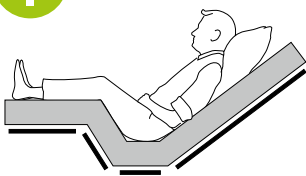


6 cm ← → 11 cm

Dubbele retractie = voorkoming van doorligwonden

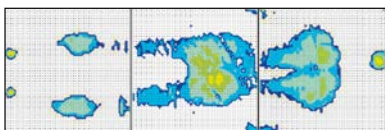


Thermografie van het BiNetic-ligvlak

Standaardligvlak zonder
belastingvermindering

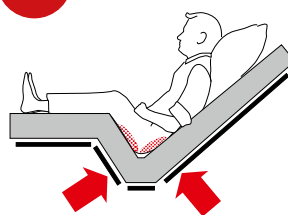

Enkelvoudige retractie = risico op doorligwonden

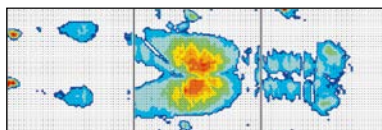

Thermografie van een standaardligvlak





Mobiliteit verbeteren en behouden

SafeLift | Revolutionaire bedbediening voor de bewoner



SafeLift kan heel eenvoudig worden bediend, zodat de bewoner zijn bed zelfstandig van positie kan veranderen en in de voor hem optimale mobilisatiepositie kan brengen. Bovendien kan hij bij het opstaan op de SafeLift-greep leunen. Hierdoor wordt de zelfmobilisatie van de bewoner bevorderd, hoeft het personeel minder vaak te worden opgeroepen om het bed te verstellen en wordt het verplegend personeel ontlast.




- Verstelknoppen voor bedhoogte en rugleuning
- Grote knoppen
- Vaste positie op een SafeFree®-beddek
- GO-knop
- 360° draaibaar
- Ergonomisch design
- Hoge stabiliteit



Video SafeLift



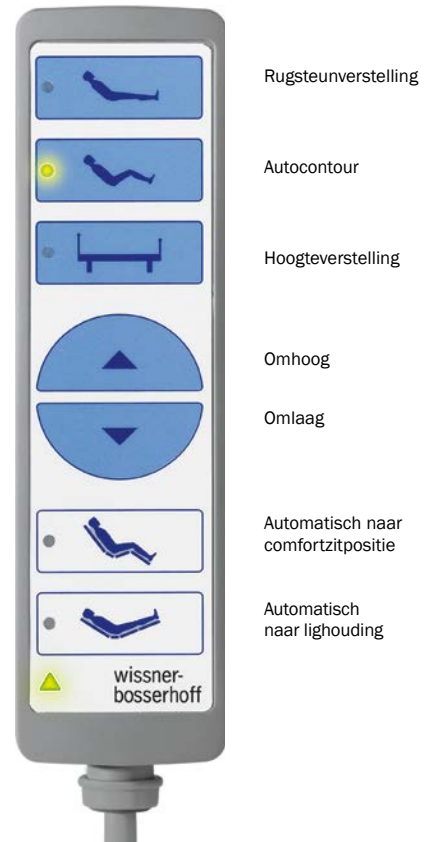

Intuïtieve bediening

Overzichtelijker en meer ergonomisch

De handbediening van de sentida verpleegbedden is aantrekkelijk door zijn overzichtelijkheid en ergonomische vormgeving: minder knoppen en grote symbolen zorgen ervoor dat de bediening intuïtief te leren is. Dankzij de voorgeprogrammeerde knoppen is de handbediening veilig in gebruik: het activeren van een functie door het onopzettelijk indrukken van een knop is uitgesloten.



Uitgebreide functionaliteit

- Nachtlampje en leeslampje
- Aparte beensteunverstelling
- Mobilisatiefunctie
- Beveiliging tegen onopzettelijk gebruik



Instructievideo's



Sleutel voor veiligheidsniveau (magneetvrij)

Drie veiligheidsniveaus



Verpleegmodus



Blokkeermodus



Bewonermodus

Aan de achterzijde van de handbediening is een blokkeerfunctie geïntegreerd. Bukken en zoeken naar de blokkeerbox die op de balk van het ligvlak is aangebracht is dus niet nodig. Via een magneetvrije sleutel kunnen drie handbedieningsmodi worden ingesteld:

Verpleegmodus:

alle keuzeknoppen zijn vrijgegeven.

Blokkeermodus:

alle functies van de handbediening zijn geblokkeerd.

Bewonermodus:

de blauwe knoppen kunnen door de bewoner worden gebruikt.

Dag en nacht veilig

SafeSense® - de intelligente Bed-Exit-Sensoren



Video SafeSense®

wissner-bosserhoff - uw betrouwbare partner bij het minimaliseren van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM): meer veiligheid voor de bewoner, hogere zorgkwaliteit, maar nooit ten koste van de zelfredzaamheid. Gebruik ons innovatieve Bed-Exit-Systeem en minimaliseer zo vrijheidsbeperkende maatregelen. Het systeem is uitgerust met een automatisch nachtlicht dat tijdens het opstaan uit bed wordt ingeschakeld en dat vanzelf dooft zodra de patiënt weer in bed ligt. SafeSense® is compatibel met de gebruikelijke verpleegproepsignaalssystemen op de markt. Verpleegbedden van wissner-bosserhoff vanaf 2002 kunnen hiermee worden uitgebreid of achteraf worden uitgerust.



Automatisch nachtlicht

- nachtlicht wordt bij het verlaten van het bed automatisch geactiveerd
- nachtlicht dooft zodra de bewoner weer in bed ligt

Instelbare timer voor oproep zorgverlener

- flexibel en traploos instelbaar van 0 sec. directalarm tot 30 min
- aanpassing aan de mobiliteit van de bewoner

Geïntegreerd of als inbouwpakket achteraf^{**}

- accessoire-optie voor actuele WIBO-verpleegbedden
- inbouwpakket achteraf voor elektrische WIBO-verpleegbedden vanaf 2002
- beschikbaar als draadloze of bedrade uitvoering

Meer veiligheid – minder VBM*

- snellere reactietijd bij vallen
- hoger veiligheidsniveau bij nacht- en weekenddiensten
- minder controlerondes
- ideaal in combinatie met sentida lage verpleegbedden en SafeFree®-beddekken

De demontabele

sentida 6-d

Op het eerste gezicht is sentida 6-d niet van een ander sentida 6-bed te onderscheiden. Ook in technisch opzicht zijn beide bedden identiek. Het verschil wordt pas bij nadere bestudering duidelijk: sentida 6-d kan vrijwel zonder gereedschap door slechts één persoon in korte tijd worden gedemonteerd en weer worden gemonteerd. Bovendien weegt geen enkel onderdeel meer dan 18 kg, zodat aan alle arbo-eisen wordt voldaan.

De sentida 6-d is bij uitstek geschikt voor gebruik in de thuiszorg of in verpleeghuizen met smalle deuren, zonder dat dit heeft geleid tot concessies op het gebied van design, kwaliteit of stabiliteit.



sentida 6-d gedemonteerd

Geen enkele module is zwaarder dan 18 kg.



Woonconcept Lilac

sentida | Design G10 | Decor Cottage pijnboomhout

Deze tijdloze en klassieke materialen en kleurstelling geven de ruimte een bijzondere ambiance.

De trendkleur Vlierbes doet denken aan het voorjaar – alles gaat weer bloeien, frisse kleuren lossen het winterse grijs af.

Dit concept is slechts een suggestie, graag geven we u persoonlijk advies.



Energie-efficiëntie en belastbaarheid

Innovatief aandrijvingsysteem

Omdat de verpleegbedden sentida 5 en 6 zijn uitgerust met een nieuwe motor, zijn ze nu nog gebruiksvriendelijker, meer belastbaar en energie-efficiënter. Dankzij de geïntegreerde led-technologie, de energiebesparende uitvoering en het servicegerichte ontwerp voldoen deze bedden gegarandeerd aan de essentiële voorwaarden voor economisch gebruik in een verpleeghuis.

Gebruiksvriendelijker



In de motor van de nieuwe sentida 5|6 is een aansluiting geïntegreerd voor een led-bedlampje. Het bed hoeft dus alleen maar verbonden te worden met het lichtnet. Het led-lampje kan nu ook met de handbediening worden bediend. Ook nieuw zijn de speciale video's met instructies voor bediening van het bed. Deze kunnen worden bekeken door de QR-code te scannen die op elk bed is aangebracht.



Instructievideo's

Belastbaar en veilig

De nieuwe motor levert bijzonder krachtige prestaties. Vooral bij grote belasting komen zijn sterke punten goed uit de verf. Het bed biedt een veilige werklast tot wel 270 kg (sentida 5|6) en kan een maximaal bewonersgewicht dragen van 235/255 kg (afhankelijk van de accessoires).



Economisch en energie-efficiënt

Omdat stroomkosten voortdurend stijgen, wordt energie-efficiëntie steeds belangrijker. De nieuwe motor verbruikt in stand-by-stand slechts 0,5 W en is zo doende bijzonder zuinig. Optimaal kabelmanagement zorgt ervoor dat slijtage tot een minimum wordt beperkt. De aansluitkabel is apart verwisselbaar, waardoor minder kosten gemaakt hoeven te worden voor opslag.

Hoeveel impact het verbruik van verpleegbedden in stand-by-modus kan hebben op de totale kosten, is goed te zien in de volgende voorbeeldberekening:



Product	Stand-by-verbruik	Stroomkosten gedurende 15 jaar*
De NIEUWE sentida	0,5 W	€ 1.950
Bed A	3,76 W	€ 15.345
Bed B	2,5 W	€ 10.200
Bed C	1,7 W	€ 6.900

*Voorbeeld: Organisatie met 100 bedden

Verlichting

soluna & lymera

Bijzondere designelementen van de armaturen zijn de golfvormige of transparante lampenkappen met het deels doorschijnende karakter. Uitgerust met een zwenkarm maken onze armaturen de exacte positionering van het lichtpunt in de buurt van het te verlichten object mogelijk.



Comfort LED leeslampje lymera

Voordelen LED

- Lange levensduur
- Laag energieverbruik
- Geen warmteontwikkeling
- Absoluut veilig gebruik



Design LED-lamp soluna met gegolfde lampenkap



Handmatige mobilisatiehulp

MobiStick 2

De MobiStick 2 is een uiterst functionele mobilisatiehulp voor de bewoner en bevordert individuele mobilisatie. Door zijn ergonomische vorm is hij eenvoudig en intuïtief te gebruiken.

Nieuw!



Zonder gereedschap
en flexibel

MobiStick 2 kan zonder gereedschap aan beide zijden van het bed worden bevestigd en kan vanaf 2004 ook achteraf op wissner-bosserhoff-bedden worden gemonteerd.



Dankzij zijn ergonomische vorm is MobiStick 2 eenvoudig en intuïtief te gebruiken en kan hij universeel worden gebruikt. De handknop is draaibaar en heeft een eenvoudig vergrendelmechanisme.



Wanneer het niet in gebruik is, kan het eenvoudigweg worden opgevouwen en staat het dus niet in de weg, maar is het snel klaar voor gebruik wanneer het nodig is.

Meer informatie:



Wij denken vooruit

memoriana | Ruimteconcept voor mensen met dementie

Adequate begeleiding van mensen met dementie is een bijzondere uitdaging voor verpleegkundigen en familieleden. wissner-bosserhoff heeft in samenwerking met dementiedeskundigen in Groot-Brittannië en Duitsland een concept voor mensen met dementie ontwikkeld. Speciaal gericht op de behoeften van de betrokkenen, zorgt het nieuwe concept voor minimale fysieke inspanning voor de begeleiding en verzorging. Centraal in de conceptontwikkeling staan de doelstellingen voor de begeleiding van demente bewoners:



Oriëntatie verbeteren

Aan de bewoners worden chronologische, kleurrijke en ruimtelijke oriëntatiepunten aangeboden. De gerichte integratie van kleuren, vormen en voorwerpen helpt bij de ruimtelijke waarneming - angsten en frustraties worden verminderd.



Zelfstandigheid verhogen

Hoe zelfstandiger de bewoner zich in zijn omgeving kan bewegen, des te meer wordt ook het verplegend personeel ontlast. Functionele inrichtingselementen, zoals handleuningen en open opbergvakken, stimuleren de mobiliteit en zelfstandigheid van de bewoners met dementie. Andere gebieden in de kamer zijn daarentegen alleen toegankelijk voor de begeleiders.



Veiligheid maximaliseren

De veiligheid van de bewoners is een centraal aspect. Lage verpleegbedden met bedhekken, handleuningen aan het meubilair en wanden, evenals visuele oriëntatiehulpen, bieden de bewoners met dementie een maximum aan veiligheid zonder merkbare beperkingen.



Kleuren | decors*



Vulkaanwit (U11502)



Berkenhout (R35018)



Lindberg-eiken (R20021)



Pijnboomhout Suomi grijs (R55022)



Beuken naturel (R24015)



Beuken (R24034)



Kersen (R42002)



Kersen Havanna (R42006)



Cottage pijnboomhout (R55023)



Acacia donker (R38006)



Mogelijke combinaties voor het memorianaprogramma (pagina 29)

Certificering

wissner-bosserhoff laat regelmatig haar productieprocessen en het management door TÜV Süd doorlichten.

De onderneming is gecertificeerd volgens de bepalingen van de DIN EN ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement-systemen, van de DIN EN ISO 13485 voor de fabricage van medische hulpmiddelen evenals ISO 14001 voor milieubeheer.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



CB-certificaat voor productveiligheid, TÜV Süd



Beoordelingen ook bedekken



Kunstleder- en stofbekleding

Nieuwe
combinatie-
mogelijkheden
—
We adviseren
u graag!



Met onze nieuwe hoogwaardige bekleding van bekende partners bieden we uitstekende afwerkingsmateriaal met de volgende eigenschappen:

- Vocht- en vuilbestendig
- Luchtdoorlatend
- Waterafstotend

- Bloed- en urinebestendig
- Bestand tegen desinfectiemiddelen
- Extreem robuust
- Milieuvriendelijk en vrij van schadelijke stoffen
- Lange levensduur
- Moeilijk ontvlambaar (conform de ontstekings-criteria conform DIN EN 1021 deel 1 + 2 en BS 5852 Crib 5*)

Kunstleder



Zilvergrijs



Parel



Berken



Kiesel



Cashmere



Smoke



Kersen



Maïs




Limoen



Royal

Stoffen

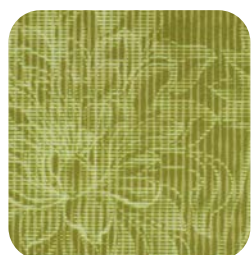

Groen, bloemmotief
(Aurora 6520)




Blauw, gestreept
(Agon 5520)




Grijs, gestreept
(Agon 8520)



Grijs, gestippeld
(Flint 8520)

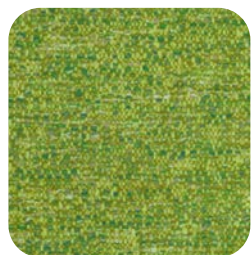

Weide (Mailo 6520)

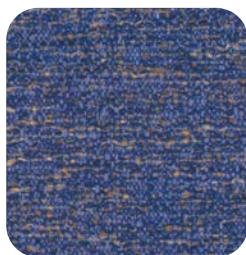

Zee (Mailo 5520)



Zand (Mailo 1521)



Steen (Mailo 8520)



Rose (Mailo 4520)

Design | Hoofd-/voeteinde

Hoofdeinde



Design A
hoofd-/voeteinde



Design D



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design T



Design Ts

Voeteinde



Design Ak
hoofd-/voeteinde



Design D



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design T



Design Ts

Vlak voeteinde



Design Ak
wegklapbaar



Design Dx



Design Dfx



Design Gx



Design Kx



Design Ox




Design Tx




Design Tsx

Accessoires | SafeSense® en SafeLift

SafeSense® sensormat 2.1

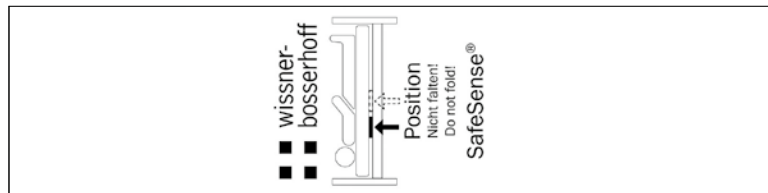

02-000876
SafeSense® sensormat 2.1
80 x 20 cm

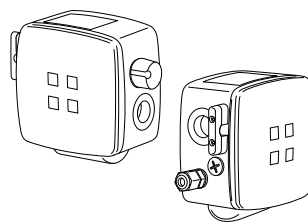


10-0812
Digitale Bed-Exit-Box 2.1
met kabel of draadloos

Ook als set
verkrijgbaar:

Sensormat 2.1 en
Bed-Exit-Box 2
10-0871
Kabelversie
10-0872
Draadloze versie

SafeSense®-aansluitkit

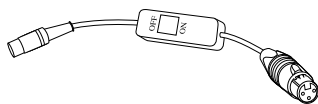

04-1508
Adapterkabel met aan-/uitschakelaar en
passende stekker voor de aansluiting
op de meldinstallatie (klantspecifiek)
voor de kabeluitvoering en draadloze uitvoering




04-1608
Adapterkabel zonder aan-/uitschakelaar;
met bijpassende stekker voor aansluiting
op de meldinstallatie (klantspecifiek) voor
de kabeluitvoering en draadloze uitvoering

SafeLift-bedbediening



10-0811
SafeLift-controller

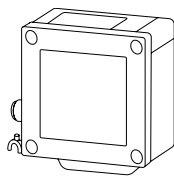


10-0808
SafeLiftBox


Als set:

10-0799
SafeLift-set

Bevestigingsplaten SafeSense® en SafeLift

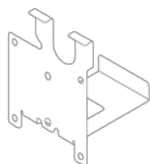


01-011193
Plaat voor DU09-motor

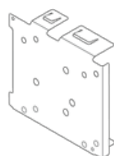


01-011194
Plaat voor Q7-motor

Opties en accessoires

Afmetingen

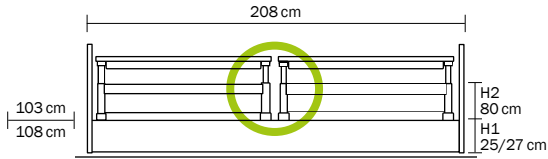


sentida met gedeelde beddekken (serie 10), zonder opening
 Externe afmetingen: L = 208 cm, B = 103/108 cm
 Matrasmaat: L = 200 cm, B = 87 cm
 H1 25/27 cm (lage positie), H2 80 cm (hoogste positie)

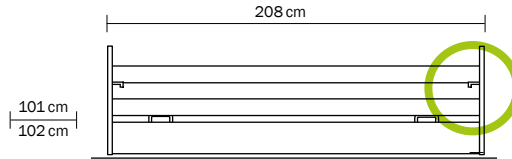


sentida met doorlopende, 2-voudige beddekken serie 09 met pistoolontgrendeling


Ligvlakken

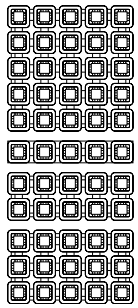

Comfort

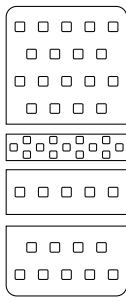


EasyClean

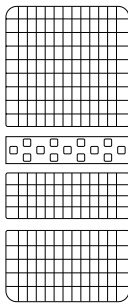


Standaard | Aero


Bedverlengingen

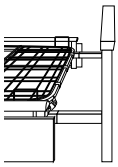


Tijdelijke bedverlenging beddek serie 10 (standaard)

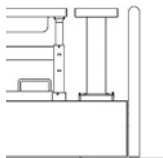


Permanente bedverlenging beddek serie 10 (optie)

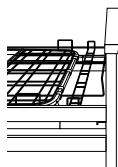

Permanente bedverlenging beddek serie 09 (optie)

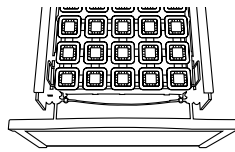


Bedverlenging met expressontgrendeling (optie)

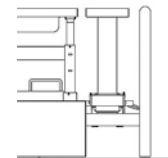

10-0570 / 10-0580
 Protector voor bedverlenging met 20cm (optie)


Opties

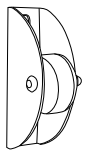


Verticale stootwielen



3D-stootwielen horizontale en verticale functie

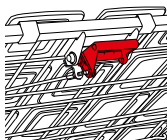


Ontgrendeling CPR aan de rugsteun

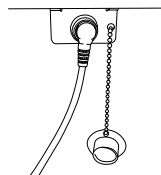


Plug + Play voor gebruik van de handbediening aan één of beide bedzijden

01-010812, 01-010813
 Schakelbare verlichting onder het bed (zonder afb.)


Accessoires

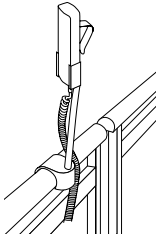

10-0419
Handbediening voor
gedeelde beddekken
10-0421
Handbedieninghouder, kort

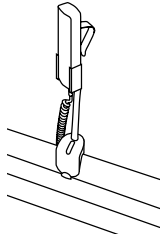


10-0422
Accessoire- en hand-
bedieninghouder voor
doorlopende beddekken
10-0421
Handbedieninghouder, kort

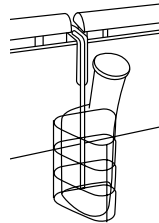


50-0345
Verkort Urine flessenmand
50-0164 Urinezakhouder
(zonder afb.)




10-0817
Openingsafdichter Basis

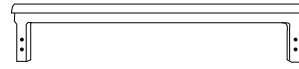


10-0818
Openingsafdichter Design

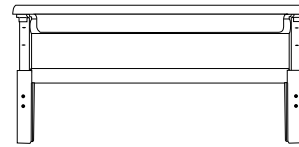


10-0819
Zijelement Flex

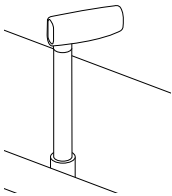


10-0634
Handmatige
mobilisatiehulp
MobiStick 2

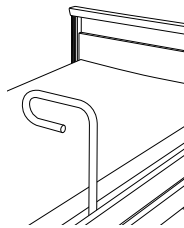

10-0715
Opstahulp voor beddekken
serie 09 en evenals ¾-bed-
dekken

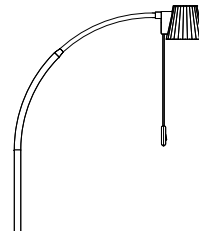


50-0773 Design-led-lamp
soluna met netadapter
50-0550 Design-led-lamp
soluna zonder netadapter

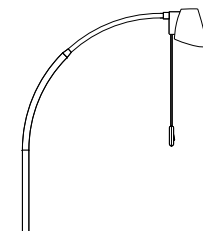


50-0677 Comfort-LED-leeslampje
lymera (met & zonder voedingseen-
heid), transparante lampenkap




50-0206
Valmat
B 90 x L 200 cm, hoogte ca. 4,5 cm

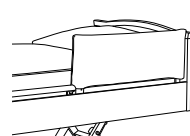


50-0174
Gestoffeerde bescherming
voor gedeelde beddekken
serie 10

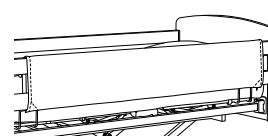


50-0338
Gestoffeerde bescherming
voor serie 09, 2-delige beddekken

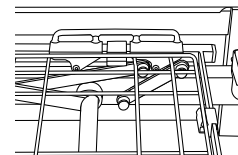


10-0563/10-0533/10-0521
Segufix-bevestiging
- voor de beensteun
- voor de rugsteun
- voor het zitgedeelte

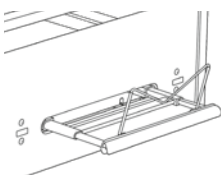


10-0617
Geïntegreerd design-beddengoedrek
Compatibel met alle bedden
(uitgezonderd de 09-serie 3-voudige
beddekken en Design A-kk)

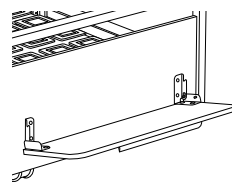

10-0719
Beddengoedplank

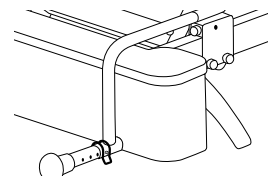

Wandafstandhouder aan het hoofdeinde,
telescopisch, alleen voor sentida 5 en 6
10-0801 kort, 1 x 20 mm
10-0802 middel, 4 x 20 mm
10-0803 lang, 8 x 20 mm
Wandafstandhouder aan het hoofdeinde,
alleen voor sentida 5 en 6 (niet afgebeeld)
10-0707 kort | **10-0709** lang

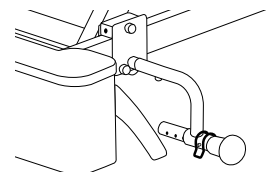

Zijdelingse wandafstandhouder,
telescopisch, alleen voor 5 en 6
10-0804 kort, 1 x 20 mm
10-0805 middel, 4 x 20 mm
10-0806 lang, 8 x 20 mm
Zijdelingse wandafstandhouder,
alleen voor sentida 5 en 6 (niet afgebeeld)
10-0708 kort | **10-0710** lang

Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Keerweer 42 | 3316 KA Dordrecht
Tel. +31 78 6521850 | Tel. +31 78 6521855
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl

wissner-bosserhoff Belgium bvba/sprl

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen
Tel. +32 15210841 | Fax +32 15291464
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

